

サンホットHC

品番 SH-0118 ¥21,000

手近かなコンセントに差し込むだけでOK!コントローラー付  
発熱面は均一な温度分布のうえ輻射熱の波長が長く、体に適切な快  
よい暖かさが得られます。繊維状なので折り曲げ強度が大いので  
故障の心配がありません。発熱部が特殊な発熱体素子のため消費電  
力が極めて少なく経済的。

●24×33.5cm 消費電力:27W




フィットアンポ FA-2

品番 SH-0413 ¥60,000

遠赤放射セラミックシートをとりいれ、湿熱の持つ特性に注目し、身  
体深部まで温熱が浸透するよう湿熱ならではの作用と使いやすさを  
テーマに設計されています。


●外形寸法:690×390×15mm ●消費電力:150W 重量:1.9kg  
●別売:コントローラー¥7,800

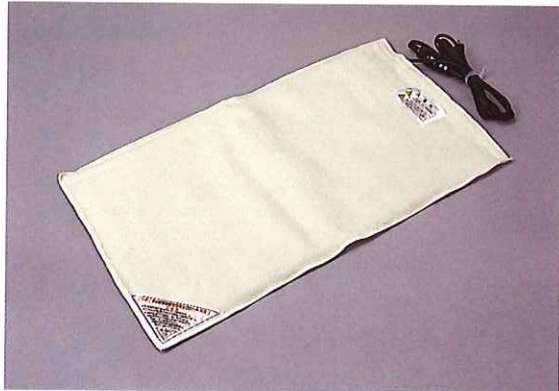

フィットアンポ FA-1

品番 SH-0413A ¥40,000

●外形寸法:390×410×15mm  
●消費電力:115W  
●重量:1.0kg  
●別売:コントローラー ¥7,800

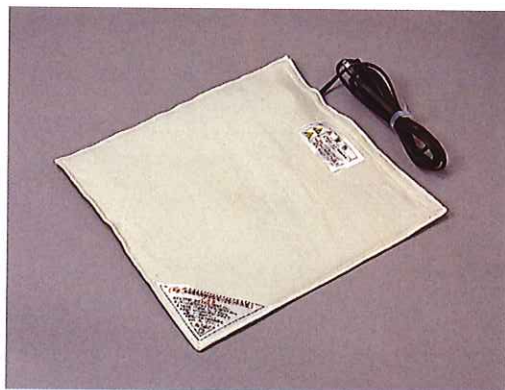

サーモフォアー

品番 SH-0114 ¥69,800

湿性ホットパック  
タイマー付 (フランネルカバー付)  
●67cm×37cm




サン・マットBS20

品番 SH-0469 ¥40,000

(21500BZZ00557000)

10ミクロン前後の遠赤外線を強く  
出す構造でその温もりは、名湯の  
ような温もりで、優しくからだの奥  
深くを温めます。また、サーモスタ  
ット装置があり異常な温度にはなり  
ません。

●放射体:特殊カーボン加工  
●電源:AC100V 50/60Hz  
●消費電力:20W  
●タイマ:スイッチ切替式  
●出力調整:1~10  
●重量:0.6g  
●サイズ:480×195mm (ヒータ部)  
(クラスII:管理)

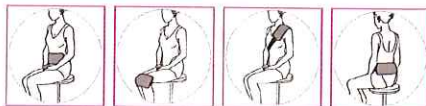


サーマルパック

サーマルパックはお湯から取り出した後の水切りに優れ、タオルに包むまでの時間が大幅に短縮できる湿性温熱用ホットパックです。

●生地：塩ビコーティング

大 (530×290)
品番 SH-0488A
¥5,900
中 (350×290)
品番 SH-0488B
¥4,900
小 (350×145)
品番 SH-0488C
¥3,500
ネック (200×610)
品番 SH-0488D
¥5,300

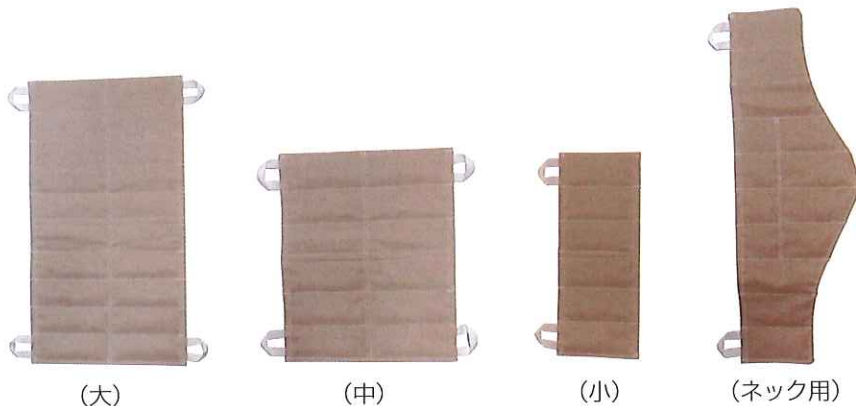

(大)

(中)

(小)

(ネック用)

ハイドロタイザー

HC-5U

品番 SH-0493A ¥730,000

HC-6U

品番 SH-0493B ¥885,000

コンセントの接触不良によるトラッキング現象、感電、漏電といったトラブルを回避するために、L型3Pプラグを採用しました。

●電源：AC100V 50/60Hz

●水温設定範囲：45～95℃

●サイズ：

(HC-5U) 475 (W) ×550 (D) ×836 (H) mm

(HC-6U) 675 (W) ×550 (D) ×836 (H) mm

●本体質量：40kg (HC-5U)、57kg (HC-6U)

●標準使用水量：60L (HC-5U)、90L (HC-6U)



ホットパック-mie

●保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィット。●柔軟性耐熱フィルム使用。●表装フィルムは洗浄が簡単&防カビ加工も。

●お湯の温度を65℃～75℃に保ち、本品をお湯に沈め10分～25分間温めてください。

H-1 (頸部・腕脚用)

品番 SH-0476 ¥2,300

(24B3X00004000001)

●サイズ：400×180mm

●重量：約450g



H-2 (腰部・肩首用)

品番 SH-0477 ¥2,900

(24B3X00004000002)

●サイズ：430×225mm

●重量：約750g



H-3 (腰部・背中用)

品番 SH-0478 ¥4,600

(24B3X00004000003)

●サイズ：450×280mm

●重量：約1,300g



温熱シップE

品番 SH-0153 ¥13,000

肌に直接貼るためシートがずれず便利です。シートタイプで薄型のため、どこにでも貼れます。一定温度が持続しますので快適にご利用いただけます。

- 温度…38℃~44℃
- 持続時間…約7~8時間
- サイズ…13cm×9.5cm
- 1箱100枚入




固定用伸縮性粘着シート

品番 SH-0113B ¥880

関節などはがれやすい部位に貼布する場合にご利用下さい。

- 1袋50枚入

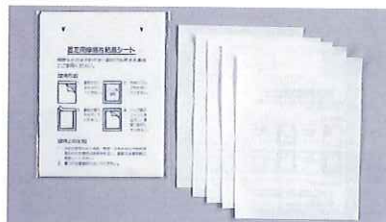

スチームホット+アイスN

品番 SH-0431F ¥8,000

特殊セラミックビーズを充填し、カバー基布に耐熱性特殊アラミド繊維を採用した、簡単にいつまでも清潔に使用できる全く新しい湿性ホットパックです。

- サイズ：480×160mm
- 重量：約600g
- 材質：セラミックビーズ、アラミド繊維、ポリエステル



①加熱



②タオルを敷いた上にのせます。

③冷凍庫に入れば、冷感具としても使用出来ます。



スチームホット+アイスO

品番 SH-0431G ¥9,000

- サイズ：29×24×2cm



スチームホット+アイスI

品番 SH-0431H ¥2,400

空気中の湿度を吸収し何度でも湿温熱、湿冷熱を利用できます。

- 温熱の場合  
電子レンジで30秒加熱してください。
- 冷熱の場合  
冷凍庫に入れる際には本品を入れてあるチャック袋そのまま、或いはラップフィルムに包んでください。



**モイストヒートパック** 電子レンジで簡単に加熱できる保温湿ビーズ封入・繊維カパータイプの温冷両用パックの新製品です。電子レンジで数分温めるだけで、ヒートセラピーに適した温熱を約20分間供給します。

スタンダード (23cm×30cm)

ハーフサイズ (12cm×30cm)

ネックラップ (23cm×52cm)

品番 SH-0143 ¥6,800

品番 SH-0144 ¥4,800

品番 SH-0145 ¥8,800



ジョイントラップ

品番 SH-0143A ¥6,800



バックラップ

品番 SH-0143B ¥8,800



キングサイズ

品番 SH-0146 ¥12,000



フィジオバック

Sサイズ 品番 SH-0484A ¥5,800

●寸法: 165 (W) × 105 (H) mm ●質量: 260g

Mサイズ 品番 SH-0484B ¥12,800

●寸法: 270 (W) × 150 (H) mm ●質量: 940g

Lサイズ 品番 SH-0484C ¥18,800

●寸法: 585 (W) × 150 (H) mm ●質量: 1300g

LLサイズ 品番 SH-0484D ¥25,800

●寸法: 3500 (W) × 310 (H) mm ●質量: 1500g

●付属品: フィジオバックカバー



- 温熱治療をもっと手軽に、もっと効率的に。ホットバックにかかる手間を最大限省きました。施術者は使いやすく、温熱の心地よさはそのままに。理想のホットバックを追求した形です。
- 厳選した素材を詰め込んだ、鉱石ホットバック。
- 遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合を調整しました。複数の鉱石が生み出す温度持続力。
- バックの温度をより高温で長時間持続させるために様々な素材や配合量を検証しました。その結果たどり着いた、5種類の鉱石と磁器セラミックボールの配合。1種類の鉱石のみを使用したバックよりも長時間高い温度を持続することを可能にしました。

交換品 フィジオバックカバー

S 品番 SH-0484F ¥800

M 品番 SH-0484G ¥1,800

L 品番 SH-0484H ¥2,400

LL 品番 SH-0484I ¥4,200

フィジオバックウォーマー

品番 SH-0484 ¥688,000

スリムなウォーマーながら、フィジオバック (M) が21枚入る75Lの大容量庫内を実現。

曜日ごとに設定できるタイマー機能を搭載。

●外形寸法: 505 (W) × 430 (D) × 765 (H) mm

●庫内寸法: 420 (W) × 320 (D) × 560 (H) mm

●質量: 44.1kg

●庫内容量: 75L

●温度調節幅: 40~80°C (過温防止装置付)

●電源: AC100V

●消費電力: 380W

●付属品: トレー7枚、電源ケーブル1本



フィジオバックウォーマー (ミニ)

品番 SH-0484E ¥388,000

小さく、軽いながらもフィジオバック (L) が8枚入る34Lの小型ウォーマー。連休OFFタイマー、個別バックタイマーの新機能付

●外形寸法: 360 (W) × 420 (D) × 478 (H) mm

●庫内寸法: 300 (W) × 320 (D) × 352 (H) mm

●質量: 16.9kg ●庫内容量: 33.7L

●温度調節幅: 40~80°C (過温防止装置付)

●電源: AC100V

●消費電力: 440W

●付属品: トレー4枚、電源ケーブル1本





MK-1DX

品番 SH-0418 ¥250,000

- 外形寸法：W465×D390×H533mm
- 電源単相：100V 消費電力：440W
- 使用温度範囲：65℃～80℃
- 重量：15kg 収容棚：6段
- 付属品：トレイ6枚 タイマー付き

パラファンゴバタグリアホットボックス

パラファンゴは、手、腕、ひじ、膝、肩、首、背中、腰等に容易にバックすることができ、温熱を指示された部位へどこでも適用することができます。パラファンゴは、体の形状にフィットすることにより、温熱の深部効果と血液量を相当程度の倍率で増幅します。温熱（多大なエネルギー）+温泉成分を身体に移させる。



MK-2N

品番 SH-0418A ¥165,000

- 外形寸法：W450×D400×H533mm
- 収容棚：6段 ●付属品：トレイ6枚
- 消費電力：570W



パラファンゴバタグリアパック

パラファンゴバタグリアは温泉泥（ファンゴ）とパラフィンを均質に混合し、溶解点、熱保有度を最適の状態にしたパックです。

(大) 品番 SH-0417 ¥13,000

- 寸法：29.5×25cm
- 重量：約1キログラム
- フィルム厚：0.4t→0.5t
- 専用カバー¥1,500



(小) 品番 SH-0417A ¥8,000

- 寸法：29.5×11.5cm
- 重量：500グラム 1枚入り
- フィルム厚：0.4t→0.5t
- 専用カバー¥1,200



ネオマグトロン TM-3200

品番 SH-0432A ¥495,000

(21200BZZ00273000)

- 消費電力：143VA
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 本体寸法：510 (W) ×300 (D) ×333 (H) mm
- 本体重量：13.5kg 出力：2出力
- 治療時間設定：1～99分 ●2人用 (クラスII：特管)



(架台別売)

ネオマグトロン TM-3400

品番 SH-0432B ¥795,000

(21200BZZ00273000)

- 消費電力：275VA
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 本体寸法：510 (W) ×300 (D) ×333 (H) mm
- 本体重量：17kg 出力：4出力
- 治療時間設定：1～99分 ●4人用 (クラスII：特管)



(架台別売)



- ① 標準温熱導子 ② 頸肩用温熱導子
- ③ 導子用カバー ④ マジックバンド

ネオマグトロンは磁気振動と温熱によって、深い患部への治療効果が期待できる電磁式温熱治療器です。新採用のバイブレーションモード（連続振動+インターバル振動）はリズムカルな振動を患部に与え、温熱効果をさらに高めます。（症状に合わせて5段階の温度設定と、2種類のバイブレーションモードを用意しました。）

ホットマグナー HM-101

品番 SH-0101 ¥280,000

(16100BZZ00350000)

ホットマグナー HM-2SC-A

品番 SH-0102 ¥580,000

(16900BZZ01118000)

ホットマグナー HM-4

品番 SH-0103 ¥860,000

(16700BZZ01633000)

- (2チャンネルタイプ)
- (専用台W-60は別売)

- (4チャンネルタイプ)
- (専用台W-60は別売)



専用台W-60 (別売) ¥60,000

■仕様 (磁気加振式温熱治療器)

管理医療機器 (クラスⅡ)、特定保守管理医療機器

形式	HM-101	HM-2SC-A	HM-4
電源	AC100V 50/60Hz クラス1 B形		
消費電力	200VA	340VA	740VA
温度調整	40℃、50℃、60℃、65℃4段切替 (自動温度調整装置内蔵)		
振動数/秒	50~120回		
寸法	260W×225D×125H (mm)	450W×300D×205H (mm)	600W×315D×415H (mm)
重量	5kg	12kg	24kg
付属品	スーパーマグナーパックLSP 1枚 マジックベルト(小) 1本 検磁器 1コ 保証書・取扱説明書 1通	スーパーマグナーパックLSP 2枚 マジックベルト(小) 2本 電源コード(2.5m) 1本 検磁器 1コ 保証書・取扱説明書 1通	スーパーマグナーパックLSP 4枚 マジックベルト(小) 4本 電源コード(2.5m) 1本 検磁器 4枚 保証書・取扱説明書 1通

スーパーマグナーライトパック




47cm×20cm  
(コード2.5m)  
LSP  
¥55,000



39cm×20cm  
(コード2.5m)  
MSP  
¥53,000



39cm×39cm  
(コード2.5m)  
OSP  
¥67,000

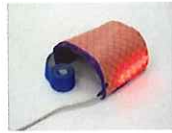

39cm×31cm  
(コード2.5m)  
ESP  
¥56,000



43cm×75cm  
(コード2.5m)  
KSP  
¥76,000



21cm×20cm  
(コード2.5m)  
WSP  
¥64,000

LSPカバー  
49cm×22cm  
¥5,000

MSPカバー  
41cm×22cm  
¥5,000

OSPカバー  
41cm×41cm  
¥7,000

WSPカバー  
23cm×22cm  
¥7,000

チル・コールド

品番 SI-0340 ¥17,000

短時間で、手軽に局所寒療法を行う器具です。内部に氷と食塩を適量混入した後、よく振りまわします。そして、両端の金属面が約-7℃になると、冷却された金属面を患部に当てて、アイスマッサージが行えます。

- 仕様
- 材質：アルミ合金、塩ビパイプ
- 寸法：φ50×160mm
- 重量：約200g



アイシングローラー

品番 SI-0471 ¥6,500

- ・銀のボールを冷凍庫で2時間凍らせれば、6時間使用可能。
- ・筋膜リリースとアイシングを同時に行うことができる。
- ・氷を使わないので、水滴で濡れる事なく衛生的。
- ・競技中の応急処置に、運動後のケアに幅広く活躍!

- 材質：アルミ合金、塩ビパイプ
- 寸法：80 (W) ×110 (H) ●重量：約200g



ニトリート コールドスプレー

品番 SI-0472 ¥600

- 冷却効果が高い応急冷却剤スプレーです。
- 内容量：420ml



スーパーコールド (ノンフロン)

品番 SI-0473 ¥1,000

- 打撲や捻挫に効果的。●痛めた部位から約20cm離し5秒間スプレー。●ロングノズルが正確で強力な噴射を可能。●大きな噴射ボタン。●ガス抜きキャップ採用。
- 内容量：500ml



スーパークーラント  
コールドスプレー 500ml


品番 SI-0449 ¥1,000

- 瞬間冷却で、突然のアクシデントにも対応できます。
- 内容量：500ml



氷のう

- 小 品番 SI-0447A ¥1,200 ●500cc
- 中 品番 SI-0447B ¥1,400 ●1000cc
- 大 品番 SI-0447C ¥1,800 ●1500cc

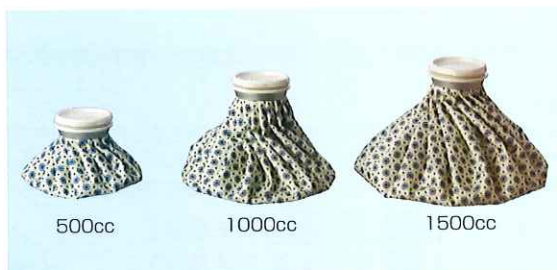

スノーパック・クール

特殊シャーベットゲルは凍らず、身体にフィットソフトな使用感です。繰り返しご使用いただけます。

- S 品番 SI-0446A ¥2,000  
●S: 105×105mm 100g  
●10個入
- M 品番 SI-0446B ¥1,400  
●M: 160×160mm 250g  
●4個入
- L 品番 SI-0446C ¥1,250  
●L: 160×280mm 500g  
●2個入



アイシングプロ

品番 SI-0474 ¥600,000 (301AHBZX00005000)


水道水で5℃～13℃のアイシングが可能です。タイマー設定で任意の治療時間が設定できます。

内蔵された空気室でカフが患部に密着し、適度な圧迫が行えます。カフ内に空気を入れることでカフを患部に密着・固定します。

- 本体の寸法：約350 (W) ×約245 (D) ×約265 (H)
- 本体の質量：約6kg (乾燥重量)
- 定格入力：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：200VA
- 設定温度範囲：5℃～13℃
- タイマー設定範囲：10分～8時間 (10分おき)



汎用カフ (標準付属品)

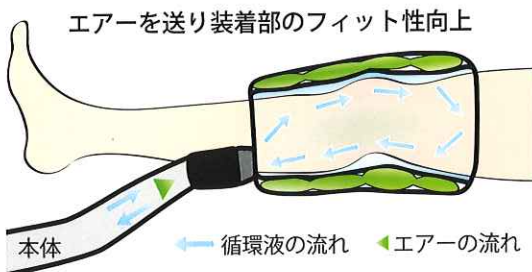

汎用カフ (標準付属品)





## 薬用アスリートRLX®

自然炭酸泉（療養泉）の徹底分析から生まれた、療養泉や血液と同じ中性PHを実現した重炭酸イオン入浴剤です。

## ●重炭酸温浴法

重炭酸イオンが溶けた36℃～38℃のぬるめのお湯に15分以上浸かる重炭酸温浴法を利用し、血流を上げ、交感神経と副交感神経のバランスをとることでベストパフォーマンスを発揮する入浴剤です。

●成分：炭酸水素Na、クエン酸、炭酸Na、PEG6000、ビタミンC・Na、カプリリルスルホン酸Na

10錠入り 品番 SI-0469 ¥1,000

30錠入り 品番 SI-0469A ¥2,500

100錠入り 品番 SI-0469B ¥7,200

炭酸ガス

疲労回復

重炭酸イオン

冷え症改善

クエン酸

潤い肌



## 薬用オンセンス

温泉成分のうち品質、効能の安定した成分を主体に、軟水化作用と保温力に優れた弱アルカリ性温浴剤です。特に発汗を促し皮膚に微刺激性のある松柏類抽出植物油を加え、保温効果を更に高めた点が特長と言えます。

700g缶

品番 SH-0405 ¥1,200

1.4kg缶


品番 SH-0404 ¥2,200

7kg 紙箱入り

品番 SH-0405A ¥10,000

15kg (7.5kg×2) 紙箱入り

品番 SH-0405B ¥18,000

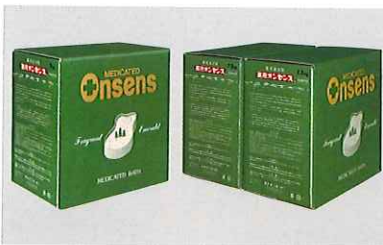

## オンセンス シトラス

品番 SH-0479 ¥2,600

柑橘類の果皮に多く含まれるリモネンやシト랄といった精油成分は、アロマによるリラックス効果とともに冷えた体を温めてくれます。

●1.6kg缶



## バイサイタイザー

BT-5N（下肢向け温浴療法用装置）

品番 SI-0333A ¥1,300,000 (22000BZX00827000)

- 定格電源電圧及び周波数：AV100V 50/60Hz
- 電源入力：900VA ●ヒーター：650W
- 噴流ノズル：前面上下可変式（2基） ●温度調節：35℃～45℃
- 治療タイマー：1分～99分 ●噴流：流速3段階切替（上下独立）
- 治療パターン：連続噴流、間欠噴流（長短）、リズム噴流
- 最大吐出量：30L/min（×2基）



BT-3N（上肢向け温浴療法用装置）

品番 SI-0333B ¥1,000,000 (224AIBZX00064000)

- 定格電源電圧及び周波数：AV100V 50/60Hz
- 電源入力：900VA
- 噴出吐出量：33L/min（×2基）
- 噴出気泡量：14.6L/min（×2基）
- 噴出圧力：120kPa ●湯温：35℃～45℃
- 治療タイマー：1分～99分 精度：設定時間の±5%



バイサイタイザーBTシリーズが、下肢浴用のBT-5Nに加え、上肢浴用のBT-3Nをラインアップしました。

渦流浴（噴流浴）装置BT-5N/BT-3Nは、DCモーターポンプを採用することにより流量を変化させることができ、低刺激での治療が可能で、柔らかなマッサージから強めのマッサージまで患者様の状態に適した強さが選べます。

「水の特性を活かしきる」がコンセプトの過流浴装置

Whirlpool Bath

## 過流浴装置 ワールプール

目指したのは水ならではの治療効果を最大限「活かす」こと。  
効果的なりハビリテーションにかかせない水治療機器が誕生しました。

### 1. 身体の動きに追従する「可塑性」

水はどのような形にも変わることができるため、身体の複雑な動きに密着しながら、温熱効果を発揮します。ワールプールは渦流をあてながら可動域訓練ができるよう設計しました。

### 2. 温熱・温冷効果

水は空気と比べ約25倍熱伝導率が高く、高い温熱作用を身体に与えられます。温熱により代謝機能や末梢血管が活性化することで、代謝機能を高めることができます。ワールプールでは、交代浴<sup>※</sup>がしやすい2槽構造を採用。

※交代浴は上肢用のみ  
※交代浴の冷浴による効果・効能は、医療機器として  
認証された効果・効能ではありません。

### 3. 水治療にかかる労力を軽減

水治療の「給湯」「治療中の指示」「清掃」などの手間を軽減。セラピストが治療に専念できることを目指しました。

### 過流浴装置 ワールプール (上肢用)

WP-700

品番 SH-0494A ¥1,480,000

(228AIBZX00023000)

- 寸法：外形／1080 (D) ×630 (W) ×800 (H) mm
- 容量：メイン槽／約72L (適量レベル) / 寸法：525 (L) ×470 (W) ×500 (H) mm、サブ槽／約9L (適量レベル) / 寸法：225 (L) ×580 (W) ×165 (H) mm
- 材質：浴槽／FRP、カバー／プラスチック (ABS)、フレーム／ステンレス
- 質量：約63kg ●最大使用者体重：100kg
- 電源：単相100V (50Hz/60Hz) 15Aアース付
- 噴流ポンプ：出力400W、吐出量：110L/min (50Hz)、130L/min (60Hz)
- 保温ヒーター：560W ●電源入力：1.5kVA ●ノズル：5個
- エア調整ノブ：1ヶ所 ●治療時間：最大40分 (デジタル表示)
- 温度調節：最大45℃ (デジタル表示) ●排水：ボタン操作
- 安全装置：漏電遮断器、空焚防止 (水位センサー)
- 付属品：保温マット、ノズルターナー、ノズルターナー掛



### 過流浴装置 ワールプール (下肢用)

WP-800

品番 SH-0494B ¥1,940,000

(228AIBZX00024000)

- 寸法：外形／1285 (D) ×570 (W) ×1040 (H) mm / 寸法：650 (L) ×300 (W) ×620 (H) mm
- 容量：浴槽／約78L (適量レベル)
- 材質：浴槽／FRP、カバー／プラスチック (ABS)、フレーム／ステンレス、座面／FRP、手すり／ステンレス
- 質量：約79kg ●最大使用者体重：100kg
- 電源：単相100V (50Hz/60Hz) 15Aアース付
- 噴流ポンプ：出力400W、吐出量：110L/min (50Hz)、130L/min (60Hz)
- 保温ヒーター：560W ●電源入力：1.5kVA ●ノズル：5個
- エア調整ノブ：1ヶ所 ●治療時間：最大40分 (デジタル表示)
- 温度調節：最大45℃ (デジタル表示) ●排水：ボタン操作
- 安全装置：漏電遮断器、空焚防止 (水位センサー)
- 付属品：保温マット、ノズルターナー、ノズルターナー掛



11

冷却・水治療装置