



消費量が多い時に最適

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿

商品コード KF-260 200 (200枚入) **450円** (税込495円)
商品コード KF-265 100 (100枚入) **310円** (税込341円)

200枚、脱脂綿(4cm×4cm) 48g、消毒液 250mL
100枚、脱脂綿(4cm×4cm) 24g、消毒液 125mL



携帯に便利な1枚包装

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿100

商品コード KF-272 (アルミパック1枚包装100枚入) **680円** (税込748円)

100枚/1枚包装、脱脂綿(3.7cm×8cm 2折) 0.2g、消毒液 1.2mL

外皮消毒薬 サラヤ アルコール含浸綿E 400入徳用

商品コード KF-297 (アルミパック1枚包装400枚入) **2,000円** (税込2,200円)

400枚/1枚包装、脱脂綿(3.7cm×8cm 2折) 0.2g、消毒液 1.2mL

医薬部外品 **サッとひと拭き。**
そのまま使える外皮消毒剤
使いやすく、経済的なアルコール含浸綿

1. 経済的

消毒用エタノールと同等の殺菌効果で、酒税加算額が課せられていないため、経済的です。

2. 衛生的

使いきり包装なので、消毒薬の繰り返し使用による汚染を防ぎます。

3. 簡単

調整の手間がかからず、万能つぼの消毒・滅菌も不要です。

4. 毛羽立ちが少ない

ウォータージェット処理による、毛羽立ちの少ない脱脂綿を使用しています。



外皮消毒剤 エスクリンα ONE

商品コード KF-268 (1枚入×200包) **1,458円** (税込1,604円)

●薬液量/包/個: 0.8mL
●薬液量(脱脂綿1gあたり): 4.0mL
●製品重量: 320g ●1梱重量: 8,250g



外皮消毒剤 エスクリンα 100

商品コード KF-269 (104枚入) **360円** (税込396円)

●薬液量/包/個: 83.2mL
●薬液量(脱脂綿1gあたり): 4.2mL
●製品重量: 105g ●1梱重量: 11,100g

医薬部外品

使いやすい
カットシート。

80%エタノールを
含浸した外皮消毒剤

- 取り出してすぐに消毒
- やさしい拭き取り効果
- 手間・時間を削減
- 国内生産



ワンショットプラス ヘキシジン0.2 (滅菌済)

商品コード 801153N 60包 **800円** (税込880円)

[クラスI] 22200APX00632000
医薬品

- 4cm×8cm 2折 滅菌済
- 0.2%クロルヘキシジン
ングルコン酸塩液



カットメン

商品コード KF-212N 4x4cm 500g **1,900円** (税込2,090円)

医療脱脂綿を
適宜の大きさに
カットしました



日本薬局方脱脂綿
医薬品ではありません。

ソフラテトラメン (カット綿) 500g

商品コード 802-028 4cm×4cm **2,000円** (税込2,200円)
商品コード 802-028C 3cm×3cm **2,050円** (税込2,255円)

商品コード 802-028B 5cm×5cm **1,950円** (税込2,145円)



脱脂綿

商品コード KF-211 500g **1,800円** (税込1,980円)

医薬品ではありません。



感染性廃棄物 回収容器

サラヤ針捨てBOX

商品コード KN-616

500円 (税込550円)

1L W109mm×D113mm×H135mm

針や鋭利物を取り扱う医療従事者のために、CDC(米国疾病管理予防センター)のNIOSHが求める機能性・アクセスの容易さ・視認性・便宜性が考慮された、針刺し切創防止用の廃棄容器です。

ルアースリップ式注射器、ルアーロック式注射器、ペン型注射器対応。

※容器のみの販売、回収は専門業者に依頼ください。



日本人の皮膚にあわせてムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した日本製医療用テープ。手で簡単にカットできる利便性商品

トランスポーア〔白色〕

商品コード	サイズ	入数	税抜(税込)
KN-271	12.5mm×9.1m	1巻	200円(220円)
KN-271B	12.5mm×9.1m	24巻	4,000円(4,400円)
KN-271D	25mm×9.1m	1巻	400円(440円)
KN-271C	25mm×9.1m	12巻	4,000円(4,400円)



通気性抜群、肌色なので目立ちません。和紙タイプ

マイクロポーア〔スキントーン〕

商品コード	サイズ	入数	税抜(税込)
KN-272	12.5mm×9.1m	1巻	250円(275円)
KN-272B	12.5mm×9.1m	24巻	6,000円(6,600円)
KN-272D	25mm×9.1m	1巻	500円(550円)
KN-272C	25mm×9.1m	12巻	6,000円(6,600円)



サイズ、材質ともに〔スキントーン〕と同じです。和紙タイプ

マイクロポーア〔白色〕

商品コード	サイズ	入数	税抜(税込)
KN-273	12.5mm×9.1m	1巻	165円(182円)
KN-273B	12.5mm×9.1m	24巻	3,800円(4,180円)



日本人の皮膚にあわせてムレにくさ、かぶれにくさを追求して開発した日本製医療用テープ。手で簡単にカットできる利便性商品

スキナゲート

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-547A	SG12 12mm×7m	24巻	取扱中止
KN-547B	SG25 25mm×7m	12巻	
KN-547C	SG50 50mm×7m	6巻	



「高固定」と「皮膚へのやさしさ」を両立した粘着性伸縮包帯。しっかり固定したい部位や、ドレーンチューブ等の固定に。

スキナゲートガチット ホワイト

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-550A	12mm×5m	24巻	取扱中止
KN-550B	25mm×5m	12巻	
KN-550C	38mm×5m	8巻	
KN-550D	50mm×5m	6巻	
KN-550E	75mm×5m	4巻	
KN-550F	100mm×5m	3巻	



スキナゲートガチット目立ちにくいページタイプ。しっかり固定したい部位や、ドレーンチューブ等の固定に。

スキナゲートガチット ベージュ

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-549A	25mm×5m	12巻	取扱中止
KN-549B	38mm×5m	8巻	
KN-549C	50mm×5m	6巻	
KN-549D	75mm×5m	4巻	
KN-549E	100mm×5m	3巻	



ダイヤカット微小孔つき半透明テープ

キープポーア

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-340A	12mm×9m	24巻	取扱中止
KN-340B	18mm×9m	18巻	
KN-340C	25mm×9m	12巻	
KN-340D	50mm×9m	6巻	



目立ちにくい色調で紫外線をカットする。

サージカルテープ・ハダ

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-338A	12mm×9m	24巻	取扱中止
KN-338B	25mm×9m	12巻	



通気性、透湿性にムレ、カブレが少なく高い粘着性がある。

サージカルテープ・21N

商品コード	サイズ	1箱	税抜(税込)
KN-339A	12mm×9m	24巻	取扱中止
KN-339B	18mm×9m	18巻	
KN-339C	25mm×9m	12巻	
KN-339D	50mm×9m	6巻	
KN-339E	75mm×9m	4巻	



サージカルテープ

商品コード	KN-334C	商品コード	KN-334B
12mm×9m (24巻入)		24mm×9m (12巻入)	
各	3,600円(税込3,960円)		

レーヨン不織布



キープシルク

商品コード	KN-337	商品コード	KN-337B
12mm×9m (1巻)		12mm×9m (24巻入)	
300円		取扱中止	
(税込330円)			



ユートクカミバン

商品コード	KN-278
巾9mm×10m (1箱10巻入)	
630円(税込693円)	

※1ケース20箱入



ニチバン紙バン

商品コード	KN-330
巾9mm×10m (1箱10巻入)	
取扱中止	

※1ケース20箱入
巾9mm×10m、和紙防水加工、低刺激性脱脂綿・ガーゼ、シップ剤の固定に



歯科ピンセット

商品コード	KN-356
2,840円(税込3,124円)	
〔クラスⅠ〕	
約16cm	

イボ取りピンセット

商品コード	KN-361
7,100円(税込7,810円)	
13cm	



トゲ抜きピンセット

商品コード	KN-253
2,320円(税込2,552円)	
12.7cm	

皮内針ピンセット

商品コード	KN-251
3,000円(税込3,300円)	
〔クラスⅠ〕	
10.5cm	



外科用ピンセット

商品コード	KN-365	商品コード	KN-364	商品コード	KN-363
小		中		大	
1,640円(税込1,804円)		2,160円(税込2,376円)		2,620円(税込2,882円)	
13cm		15cm		18cm	

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・ピンセット

灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル・クリーム

ベッド・マクラ

治療室

ボスター・模型・スター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テーピング用品

治療補助用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

カナケンもぐさ・線香



▼もぐさ (箱入)
業務用



◀徳用もぐさ (袋入)
業務用

▼小箱もぐさ
教材用・家庭用



もぐさ (箱入) 業務用

箱のサイズ: 21×28×6cm



特選点灸用 もぐさ

商品コード KQ-101

100g 箱入

18,000円 (税込 19,800円)



最上点灸用 もぐさ

商品コード KQ-102

100g 箱入

13,300円 (税込 14,630円)



点灸用 もぐさ

商品コード KQ-103

100g 箱入

11,000円 (税込 12,100円)



間接灸用 もぐさ

商品コード KQ-104

150g 箱入

12,400円 (税込 13,640円)



上質灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-105A

200g 箱入

11,500円 (税込 12,650円)



灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-106A

300g 箱入

7,200円 (税込 7,920円)



小箱もぐさ教材用・家庭用

箱のサイズ: 10×15×3cm



小箱もぐさ 特選点灸用

商品コード KQ-401

11g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 最上点灸用

商品コード KQ-402

13g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 点灸用

商品コード KQ-403

17g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 間接灸用

商品コード KQ-404

25g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 上質灸頭針用

商品コード KQ-405

30g 入、線香 3本付

2,550円 (税込 2,805円)



小箱もぐさ 灸頭針用

商品コード KQ-406

40g 入、線香 3本付

2,100円 (税込 2,310円)



徳用もぐさ (袋入) 業務用

袋のサイズ: 27×10.5×約42.5cm



(徳用) 上質灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-105B

1,000g 袋入

50,000円 (税込 55,000円)



(徳用) 灸頭針用 もぐさ

商品コード KQ-106B

1,000g 袋入

19,700円 (税込 21,670円)



温灸用 もぐさ (松)

商品コード KQ-107

1,000g 袋入

10,000円 (税込 11,000円)



温灸用 もぐさ (竹)

商品コード KQ-108

1,000g 袋入

9,200円 (税込 10,120円)



温灸用 もぐさ (梅)

商品コード KQ-109

1,000g 袋入

6,800円 (税込 7,480円)



(徳用) 温灸用 もぐさ (梅)

商品コード KQ-109B

5kg 箱入

27,200円 (税込 29,920円)

灸療用紙筒

商品コード KQ-239

1000個入

3,500円 (税込 3,850円)

φ10×10mm

※1回限り、再利用不可

※接着剤等なし



線香

商品コード KQ-301

6束入

2,020円 (税込 2,222円)

1束 80g 約50~55本×6、
長さ14.5cm 太さφ3.8mm



チャッカマン ぬくもり

商品コード KQ-458

あずき色

500円 (税込 550円)

W39×D27×H175mm

※ボンベの取り扱いには
ご注意ください。

※分解はしないで下さい。
故障の原因となります。

日本製



温灸純艾條

商品コード KQ-409
1箱 10本入
1,500円 (税込 1,650円)

ロール式
体内の寒湿を排泄し、機能の活力を促進する作用があります。
中国製
直径(約) 16mm×長さ(約) 210mm



KANA 棒灸フード

商品コード KQ-360
2,500円 (税込 2,750円)

素材：木製
付属品：火消ツボ、灰落予防ネット付

【フード】高さ 約10.5cm
外径 約3.8～約4.8cm
【柄】約24cm



太乙薬條

商品コード KQ-407
1箱 10本入
2,100円 (税込 2,310円)

日本人向
もぐさを主として、丹参、当归、川芎などの漢方を混合した棒灸。
中国製
直径(約) 17mm×長さ(約) 210mm

※ご使用の際は絵柄の紙をはがしてください。

類似品にご注意ください

弊社で取り扱いの「温灸純艾條・太乙薬條」は「中国醫薬保健品進出公司 湖南分公司」製で品質が保証されている製品です。



大和漢 棒灸

商品コード KQ-448
1箱 10本入
1,380円 (税込 1,518円)
約 17mm×20cm

燃焼時間や燃焼温度にこだわり、バラつきを抑えた棒灸

- 1本当たり燃焼時間：100～120分(風などの環境による)
- 燃焼中 中心温度：約550℃



微煙・微臭タイプ

ねりもぐさ

商品コード KQ-348
1箱 (20本入)
1,800円 (税込 1,980円)

重さ：約7g
長さ：約12.5cm
φ 約10mm



- 金属製 ● 便利な切込入
- 温灸純艾條向

内径 18.5mm



新火消しつぼ

商品コード KQ-411B
2,000円 (税込 2,200円)
約 φ 18.5×36mm 重さ 100g



無煙棒灸

商品コード KQ-361
1箱 5本入
2,500円 (税込 2,750円)

成分：ヨモギの葉、炭化艾
長さ：約20.6cm、φ 約1.8cm
● もぐさを炭化状にしたもの。無煙、微香性の棒灸。
● 消火について
消火するときは、先端1cm程水に浸けて消火して下さい。(消火を必ず確認)
再使用する場合は、ある程度乾燥した状態であることを確認して下さい。



無煙艾条

商品コード KQ-420
5本入
1,900円 (税込 2,090円)

温灸用ねりもぐさ(炭化状)
直径(約) 14mm
長さ(約) 115mm
● 煙もなく、匂いも微量。
● あぶり灸として使う。
● 熱量があり、ロール状のもぐさよりも治療時間の短縮になる。



※もぐさは別売

竹塩陶器セット

商品コード KQ-457A
18,000円 (税込 19,800円)

陶器：日本製(香蘭社製)
竹塩：韓国製



竹塩

商品コード KQ-457B
6,000円 (税込 6,600円)

韓国製
約330g



※写真はイメージです。

竹塩専用陶器

商品コード KQ-457C
17,000円 (税込 18,700円)

日本製(香蘭社製)
φ 約7.5cm(内側) φ 約8.5cm(外側)

ミネラル豊富なアルカリ性の竹塩

竹塩は約1700年前より韓国の開巖寺の僧侶たちが伝えたという貴重な塩で、一般の塩より酸化還元電位が顕著に高く抗酸化作用が非常に高い塩です。伝統的手法で手間のかかった竹塩を利用し塩灸を行ってみたいいかがでしょうか

使用方法 使用目安約15g(2～3社分使用可能)

- ① 小皿に約15g以上の専用塩を1cmほどの厚さに入れた後、鹽の上に置く。
 - ② 外側の陶磁器で固定するように小皿の外側において安定感を確認する。
 - ③ 治療の換気を確認した後、上質の艾で円形にしながら、底を500円玉の大きさに、高さ3センチ程度に作り、塩が入っている陶器の真ん中に艾を乗せて安定させ、火をつける。
 - ④ 患者が熱いと言われた場合は、すばやく外して少し冷やしてから再度肌に乗せる。
- 注意：火をつけた後は、患者様のそばにいてすぐ対応できるようにお願い致します。
- 総灸数は2～3社にする。



せんねん灸比叡

商品コード KQ-214

300点入

6,000円

税込6,600円

灸頭針用切もぐさ



灸頭鍼用粒切りもぐさ (穴有)

商品コード KQ-451A

500粒入 (小)

3,660円 (税込4,026円)

長さ10mm×径10mm

商品コード KQ-451B

500粒入 (大)

4,560円 (税込5,016円)

長さ15mm×径12mm




火龍缶

商品コード KQ-438

3,000円 (税込3,300円)

手柄の長さ10cm
釜フタの直径5.7cm
釜の高さ6cm

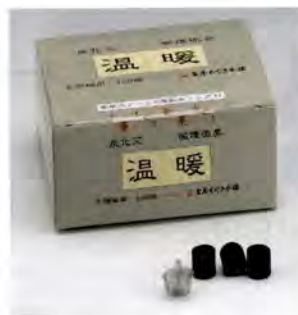

温暖 (灸頭鍼用)

商品コード KQ-249A

120個入り

5,200円

税込5,720円

炭化艾120コ
灰とりスプーン1本
専用キャップ6コ付

炭化艾

商品コード KQ-249B

480個入り

10,000円

税込11,000円

温暖専用キャップ

商品コード KQ-249C

10個入り

1,500円

税込1,650円



ラック灸

商品コード KQ-264A

20個入

1,120円

税込1,232円

バネ型受け皿20個
炭化艾20個



ラック灸500

商品コード KQ-264B

500個入

11,000円

税込12,100円

バネ型受け皿32個
炭化艾500個
保存袋1袋

微煙・微臭の炭化艾 (釜屋もぐさ製) 使用

- バネ型受け皿が炭化艾の落下を防止します。
- バネ型受け皿だから丈の輻射熱をさまたげません。
- 軽量化を実現しました。
- 微煙、微臭の炭化艾で室内をクリーンに保てます。

灸頭鍼はやりたけれど煙と臭いがちょっと…という先生方へ



上晒薬もぐさ (さらしもぐさ)

商品コード KQ-208

1箱

1,173円

税込1,290円

約3g

一般向小箱入の最上もぐさ。



切りもぐさ (中)

商品コード KQ-207B

1箱500壮入

1,173円

税込1,290円

大極上品 (特選点灸)。米粒大に1つ1つ巻いてあるので点灸用としてすぐにご利用できます。



マツウラの漢方軟膏 紫雲膏 (シウンコウ)

商品コード 801-209

20g包装

1,630円 (税込1,793円)

第2類医薬品

ひび・あかぎれ、しもやけ、やけどなどに。漢方の代表的な外用剤です。



灸点ペン

商品コード KQ-311A

赤

商品コード KQ-311B

黒

各370円 税込407円



灸点器

商品コード KQ-310

2,700円 (税込2,970円)

スミツボ付。バネ式。



メディスティックペン (赤・青セット)

商品コード KQ-445

720円 (税込792円)



灸点スミ

商品コード KQ-313

550円 (税込605円)



チャッカマンぬくもり

商品コード KQ-458

あずき色

500円 (税込550円)

W39×D27×H175mm
たて置きできる便利な台座付き。

※ボンベの取り扱いにはご注意ください。

※分解はしないで下さい。故障の原因となります。

日本製



長生灸 Non-smoke (ノンスモーク)

商品コード KQ-461B 200 壮入 4,200円 (税込 4,620円)

商品コード KQ-461A 600 壮入 10,600円 (税込 11,660円)

サツと火がつく、煙の出ないお灸。線香でも着火可能!



長生灸 お灸日和フルーツ

商品コード KQ-441A 業務用 1000 壮入 21,300円 (税込 23,430円)

商品コード KQ-441B 小箱 50 壮入 × 6 箱 7,260円 (税込 7,986円)

※ 患者様販売用で 6 箱入りでの販売のみとなります。



柔 (やわら) スモークレス

商品コード KQ-359A 高 180 入

商品コード KQ-359B 中 180 入

商品コード KQ-359C 低 180 入

各 5,520円 (税込 6,072円)

弱 ← → 強

温熱レベル 1 2 3 4 5

温熱レベル 2 1 2 3 4 5

温熱レベル 3 1 2 3 4 5

温熱レベル 4 1 2 3 4 5

温熱レベル 5 1 2 3 4 5



せんねん灸の奇跡 ソフト

商品コード KQ-275A 200 点入 4,400円 (税込 4,840円)

商品コード KQ-275B 50 点入 1,380円 (税込 1,518円)

商品コード KQ-275C 12 点入 500円 (税込 550円)

せんねん灸の奇跡 レギュラー

商品コード KQ-273A 220 点入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-273B 50 点入 1,380円 (税込 1,518円)

商品コード KQ-273C 12 点入 500円 (税込 550円)

せんねん灸の奇跡 ハード

商品コード KQ-278A 220 点入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-278B 50 点入 1,380円 (税込 1,518円)



せんねん灸 オフ ソフトきゅう 竹生島

商品コード KQ-211A 70 点函入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-211B 150 点函入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-211C 230 点函入 3,630円 (税込 3,993円)

商品コード KQ-211D 340 点函入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-215B 1,800 点函入 24,200円 (税込 26,620円)

せんねん灸 オフ レギュラーきゅう 伊吹

商品コード KQ-209A 80 点函入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-209B 170 点函入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-209C 260 点函入 3,630円 (税込 3,993円)

商品コード KQ-209D 380 点函入 4,840円 (税込 5,324円)

商品コード KQ-215 2,000 点函入 24,200円 (税込 26,620円)



せんねん灸 オフ みそきゅう 湖国

商品コード KQ-213A 70 点入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-213B 150 点入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-213C 230 点入 3,630円 (税込 3,993円)

せんねん灸 オフ にんにくきゅう 近江

商品コード KQ-210A 70 点函入 1,210円 (税込 1,331円)

商品コード KQ-210B 150 点函入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-210C 230 点函入 3,630円 (税込 3,993円)



せんねん灸 レインボー

商品コード KQ-272A 60 点入 1,320円 (税込 1,452円)

商品コード KQ-272B 20 点函入 550円 (税込 605円)

せんねん灸 強力温熱 レギュラー

商品コード KQ-280A 170 点入 2,420円 (税込 2,662円)

商品コード KQ-280B 2000 点入 24,200円 (税込 26,620円)

「せんねん灸 オフ レギュラーきゅう 伊吹」の台座の厚みを薄くして、温熱レベルを上げました。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン
ピンセット

もぐさ
灸用品

検査測定

滅菌・消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マクラ

治療室
設備

模型・
ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持・
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

もぐさ・灸用品



アイクレイ台座灸 泉

商品コード KQ-356
200個入り
2,000円(税込2,200円)

商品コード KQ-358
100個入り
1,100円(税込1,210円)

A	ハード
B	レギュラー
C	マイルド
D	ソフト

アイクレイ
台座灸

- 温熱の持続時間が長い
- 最高温度が安定
- 台座の粘着力が高い
- 他のお灸に比べてやや熱めです




アイクレイ台座灸 和

商品コード KQ-357
1,000個入り
10,000円(税込11,000円)

A	ハード
B	レギュラー
C	マイルド
D	ソフト



原材料は
100% 無農薬
天然よもぎ

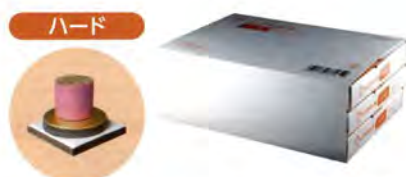

ユニコらくらく灸
ハード(業務用)

商品コード KQ-449A
288荘入(96荘入×3)
6,900円(税込7,590円)

- もぐさ直径: 約11mm ●高さ: 15mm(台座含む)
- 台座: 約20mm×約20mm
- 燃焼時間: 7~8分、設定温度: 59~63度(※室内の温度設定約25℃の場合)

96荘単位で
患者様に
販売できます。



ユニコらくらく灸
レギュラー(業務用)

商品コード KQ-449B
288荘入(96荘入×3)
6,900円(税込7,590円)

- もぐさ直径: 約10mm ●高さ: 15mm(台座含む)
- 台座: 約20mm×約20mm
- 燃焼時間: 7~8分、設定温度: 57~60度(※室内の温度設定約25℃の場合)

96荘単位で
患者様に
販売できます。



ユニコらくらく灸
ソフト(業務用)

商品コード KQ-449C
288荘入(96荘入×3)
6,900円(税込7,590円)

- もぐさ直径: 約8mm ●高さ: 15mm(台座含む)
- 台座: 約20mm×約20mm
- 燃焼時間: 6~7分、設定温度: 49~53度(※室内の温度設定約25℃の場合)

96荘単位で
患者様に
販売できます。

気持ちのよい温度のお灸
カマヤミニ



120個入り

600個入り

2000個入り



カマヤミニ

商品コード KQ-201 120個入り(強) 商品コード KQ-202 120個入り(弱) 商品コード KQ-203 120個入り(ソフト)
各2,200円(税込2,420円)

商品コード KQ-201B 600個入り(強) 商品コード KQ-202B 600個入り(弱) 商品コード KQ-203B 600個入り(ソフト)
各10,500円(税込11,550円)

商品コード KQ-201C 1箱2000個入り(強) 商品コード KQ-202C 1箱2000個入り(弱) 商品コード KQ-203C 1箱2000個入り(ソフト)
各29,300円(税込32,230円)



カマヤミニスモークレス

商品コード KQ-257A 120個入り 2,800円(税込3,080円)
商品コード KQ-257B 業務用600入 12,000円(税込13,200円)



カマヤペット
(フード付)

商品コード KQ-205
7,800円(税込8,580円)
(クラスII/一般)(55B第76号)
ペット5本、フード、火消し缶付

カマヤペット
スプアー(6本)


商品コード KQ-206
6,200円(税込6,820円)



カマヤミニFIT

商品コード KQ-267
120個入り
2,950円(税込3,245円)

シールタイプ

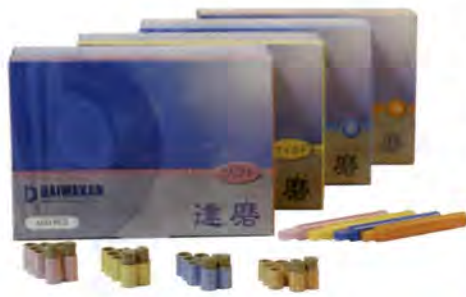**達磨 (だるま)**

商品コード KQ-250A

強 600入

商品コード KQ-250B

弱 600入

商品コード KQ-250C

マイルド 600入

商品コード KQ-250D

ソフト 600入

各**8,970円** (税込9,867円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 9mm	直径 10mm	直径 10.5mm	直径 10.5mm
高さ 14.5mm	高さ 13mm	高さ 12mm	高さ 11.5mm

筒底のノリに水を付けて使います。
熱さは4タイプ。部位や体質により使いわけください。

紙筒型ミニ灸**達磨
スーパータックル**

商品コード KQ-259A

強 600入

商品コード KQ-259B

弱 600入

商品コード KQ-259C

マイルド 600入

商品コード KQ-259D

ソフト 600入

各**8,970円** (税込9,867円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 9mm	直径 10mm	直径 10.5mm	直径 10.5mm
高さ 14.5mm	高さ 13mm	高さ 12mm	高さ 11.5mm

肌への接着はシール式でワンタッチ。(水を使いません)
強さ別の押し出し棒は腕に装置して使います。
皮膚に優しい糊を使用し、粘着力を更に強化！水付け不要！
また、押し出し棒は腕時計型で作業効率を更にアップ！
熱さは4タイプ。部位や体質により使いわけください。

紙筒型ミニ灸**響 (ひびき)**

商品コード KQ-251A

強 200入

2,880円 (税込3,168円)

商品コード KQ-251B

弱 200入

2,530円 (税込2,783円)**灸頭鍼用ロール切艾**

弱	強
直径 12mm	直径 14mm
高さ 14mm	高さ 15mm

灸頭針用ロール切艾

いわゆる灸頭鍼用モグサ。
燃焼時間の長い強 (約11分) と短い弱 (約9分) の2種類をご用意しました。
※ 燃焼時間は使用環境により前後いたします。
鍼柄用の穴を開けておりますので、スグに鍼柄に設置していただけます。

**柔 (やわら)**

商品コード KQ-252A

強 200入

商品コード KQ-252B

弱 200入

商品コード KQ-252C

マイルド 200入


商品コード KQ-252D

ソフト 200入

各**4,140円** (税込4,554円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 5mm	直径 5mm	直径 5mm	直径 6mm
高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm

※ 台座の厚みで温度をコントロールします。

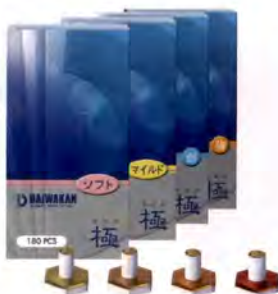台座式ミニ灸**極 (きわみ)**

商品コード KQ-268A

強 180入

商品コード KQ-268B

弱 180入

商品コード KQ-268C

マイルド 180入

商品コード KQ-268D

ソフト 180入

各**3,110円** (税込3,421円)

ソフト	マイルド	弱	強
約 41～43℃	約 43～45℃	約 45～47℃	約 47～49℃
直径 5mm	直径 5mm	直径 5mm	直径 6mm
高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm	高さ 10mm

※ 台座の厚みで温度をコントロールします。

ロングセラーの柔 (やわら) の姉妹品。
柔の特長をそのまま継承し生産コストを極限まで抑えた新商品。

台座式ミニ灸



長生灸 ライト

商品コード KQ-261A
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-261B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)



長生灸 ハード

商品コード KQ-262A
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-262B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)



長生灸 レギュラー

商品コード KQ-224
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-224B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)





長生灸 ソフト

商品コード KQ-446A
1000 仕入
13,310円
(税込 14,641円)

商品コード KQ-446B
200 仕入
3,150円
(税込 3,465円)

長生灸 温度のめやす

お灸が初めての方にはライトかソフトをおすすめします。温度の感じ方は人それぞれですので、低温のタイプでの感じ方を基準に適切なお灸を選んでください。

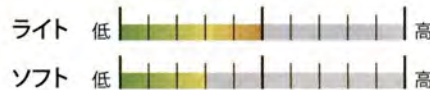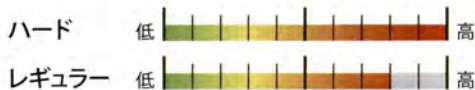

つば灸 NEO NEXT

商品コード KQ-435A
600 入 レギュラー
商品コード KQ-437A
600 入 マイルド
各 11,090円
(税込 12,199円)

商品コード KQ-435B
120 入 レギュラー
商品コード KQ-437B
120 入 マイルド
各 2,240円
(税込 2,464円)

熱すぎず、柔らかな温熱が心地よい新しいお灸です。
●水で濡らさずそのまま施灸(シールタイプ)
●押し出し棒不要、片手で取って貼るだけ
※底面に粘着シートがあり、台座からはがせばすぐ使えます。



長安 NEO DX

商品コード KQ-260A
600 入 レギュラー
商品コード KQ-266A
600 入 マイルド
各 6,620円
(税込 7,282円)

商品コード KQ-260B
120 入 レギュラー
商品コード KQ-266B
120 入 マイルド
各 1,760円
(税込 1,936円)

●水で濡らさずそのまま施灸



調熱絆

商品コード KQ-263
12 シート入り
(1シート11枚添付)
420円 (税込 462円)

長生灸専用。熱源と肌の距離を調節し、熱の伝わり方を変えることで、熱さを調節することができます。内側の円を残したり取り除いたりして、温度を2段階調節することができます。



灸点紙 (灸熱緩和紙)

商品コード KQ-314
1箱 (1シート20面×10シート)
800円 (税込 880円)



函入り線香付 もぐさ

商品コード KQ-281
7g
800円 (税込 880円)

一般家庭用「点灸もぐさ」。初心者でもひねりやすく、すえやすい。点火しやすいお灸専用線香付きで便利。



最高級もぐさ

最上点灸用もぐさは点灸用の中で最高級の物です。

灸頭針用もぐさ

商品コード KQ-450
7g
1,170円 (税込 1,287円)

最上点灸用もぐさ

商品コード KQ-276
5g
1,350円 (税込 1,485円)



高級もぐさ線香入

赤箱 日本一黄金山

商品コード KQ-443
10g
2,560円 (税込 2,816円)

「日本一黄金山」は精製度が高く、淡い黄金色で独特の高い香気を含んでいます。



KANAROLLER灸 (本体)

商品コード KQ-362

3,800円 (税込4,180円)

長さ約15cm、φ約4cm、重さ約139g

使用方法

- ①キャップを外します。
- 切り艾を②へ差し込みます。
- 切り艾に火をつけ、①キャップを取り付けます。
- ③布カバーをかぶせます。
- 身体の上で本体を転がして下さい。

ご注意

熱く感じる場合は、手ぬぐいなどを身体の上に置いて転がして下さい。
転がさずに放置すると、高温になる場合がありますので、ご注意下さい。

灸頭針用切もぐさ

商品コード KQ-363

200入り

1,800円 (税込1,980円)

長さ約1.5cm
φ約1.3cm
燃焼時間約15分

KANAROLLER灸での使用例



irodori 温灸ローラー

商品コード KQ-349

(M) 1本

2,700円 (税込2,970円)

商品コード KQ-350

(S) 1本

2,400円 (税込2,640円)

温灸×押圧の効果で筋肉・経絡にアプローチ！！

火をつけた棒灸を本体にセットしコロコロと転がすだけで温熱&押圧のダブル刺激がこれまでになかった癒し効果を実現します。

(手ぬぐい、ブラシ付)



irodori 炭化棒灸

商品コード KQ-349B

(M) 12本入

1,800円 (税込1,980円)

サイズ：直径7mm×長さ12cm
燃焼時間(1本が燃えきる時間)：約80分
※irodori 温灸ローラー (M) 用

商品コード KQ-350B

(S) 25本入

2,100円 (税込2,310円)

サイズ：直径4mm×長さ12cm
燃焼時間(1本が燃えきる時間)：約40分
※irodori 温灸ローラー (S) 用

クセのある匂いと大量の煙がネックとなり、棒灸を治療メニューに組み込めない？そんな棒灸特有の匂いと煙に真剣に向き合った商品が、irodori 炭化棒灸です。



もぐさんの箱きゅう

商品コード KQ-452A

11,000円 (税込12,100円)

セット内容

- 箱きゅう本体
- 専用炭化もぐさ 50粒入り袋
- もぐさん刺繍入りタオル (触感の良いガーゼ生地使用)
- 炭化もぐさ専用ピンセット
- 連結用磁石ボール



箱きゅう本体
高さ100mm
幅110mm
約300g

メッシュかご

ふた

磁石

通気口

こだわりポイント 20分間のほどよい温熱

専用熱源の炭化もぐさを使用することで、臭い・煙に悩まされずに使用できる箱灸です。本体は国産のひのき材を使用した、あたたかみのある丁寧な作り。20分間の施灸時間で施術にも取り入れやすく、ここちよい温熱で患者さんに喜んでいただけるよう、設計にこだわりました。灰の捨てやすいメッシュかごや連結機能など、使いやすさにも配慮しています。

※ご使用時は必ずタオルや手ぬぐいを敷いてお使いください。



もぐさんの箱きゅう用専用炭化もぐさ

商品コード KQ-452B

100粒入り

6,600円 (税込7,260円)

こだわりポイント 専用炭化もぐさ

燃焼時に煙・ニオイが出ない

「もぐさんの箱きゅう」に付属している「専用炭化もぐさ」の最大の特徴は、燃焼時に煙・ニオイが出ないこと。火をつけた瞬間から、燃え尽きるまで、煙やニオイを出すことはありません。

驚きの火付きの良さ

100%もぐさのみを原料とした炭化もぐさを開発しました。

計算された施灸温度・時間

施灸時間は温灸術として取り入れやすい20分間を目安にしています。




枅おんきゅう 枅

商品コード KQ-417

9,800円 (税込10,780円)

- 檜製内面石膏板付 腹部・背部用温灸補助具
- サイズ：縦14.2×横14.2×高さ10.5cm
- ※枅が熱くならないよう内面に石膏板施行
- ※もぐさを置く金網は高さ調整ができます。
- ※枅の底面にスベリ止め加工付
- ※フタの裏面に活性炭セット用蝶ネット付

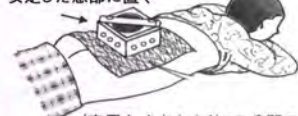腰・背中・腹など
安定した患部に置く

(専用もぐさなら約15分間の治療)

枅型で脱煙

脱臭付の温灸器



枅おんきゅう用 別売品

円形もぐさ

商品コード KQ-417B

8個×12箱 96個入り

6,800円 (税込7,480円)

※上部に着火剤を付けた円形もぐさ
※燃焼時間約15分(余熱+2分)

活性炭

商品コード KQ-417C

600円 (税込660円)

- 臭い、煙を減少させます。枅おんきゅうの機能が低下してきたら交換します。
- 活性炭不織布包装(数回まで水洗い乾燥後使用可)
- サイズ：14cm×14cm×厚さ10mm

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン

灸用品

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康維持

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

はるだけで気持ちよい温熱効果



火を使わないお灸 太陽

商品コード KQ-277A

6個入
700円 (税込770円)

商品コード KQ-277B

12個入
1,300円 (税込1,430円)

商品コード KQ-277C

30個入
2,800円 (税込3,080円)

商品コード KQ-277D

60個入
5,300円 (税込5,830円)

火を使わずに、はるだけで気持ちよい温熱効果が約3時間。衣服の下にはり、そのまま外出もできる画期的なお灸です。外出時の携帯用として便利な2コ入タイプからお得な大入りタイプまで。



①はがす
上部(凸部)のシールをはがしてください。



②はがす
皮膚面(底部)のシールをはがしてください。



③はがす
患部にはってください。

※上部シールを開封すると発熱を開始します。
※本品は、同じところには一日一回を目安にご使用ください。
※本品の3時間以上の使用はおやめください。

火を使わないお灸 世界 Lサイズ

商品コード KQ-279D

10枚入
3,300円 (税込3,630円)

サイズ：縦80mm×横105mm
火を使わずにはるだけで気持ちよい温熱効果が約8時間。広い範囲に最適なLサイズです。
※本品の8時間以上の使用はおやめください。



Lサイズ10枚入

火を使わないお灸 世界 Mサイズ

商品コード KQ-279A

3枚入
700円 (税込770円)

商品コード KQ-279B

12枚入
2,400円 (税込2,640円)

商品コード KQ-279C

24枚入
4,400円 (税込4,840円)



皮膚面(裏面)のシールをはがしてください。



患部に直接はってください。



※外袋を開封すると発熱を開始します。
※本品は、同じところには一日一回を目安にご使用ください。

サイズ：縦65mm×横78mm

火を使わずに、はるだけで気持ちよい温熱効果が約4時間。衣服の下でも使えるお灸です。肩や腰などに最適なMサイズです。
※本品の4時間以上の使用はおやめください。

Mサイズ12枚入

Mサイズ24枚入

芳しい香りとお灸のコラボレーション

好きな香りがえらべます

はじめてのお灸 くだもののかほり

商品コード KQ-270A

50点入
1,400円 (税込1,540円)

商品コード KQ-274A

150点入
3,500円 (税込3,850円)

くだもののかほり

もぐさの香りにほんのり甘いりんごとレモンの香りをプラスした香りが選べるお灸です。

はじめてのお灸 はなのかほり

商品コード KQ-270B

50点入
1,400円 (税込1,540円)

商品コード KQ-274B

150点入
3,500円 (税込3,850円)

はなのかほり
もぐさの香りにやさしいバラとみどりの香りをプラスした香りが選べるお灸です。

はじめてのお灸 緑茶のかほり

商品コード KQ-270C

50点入
1,400円 (税込1,540円)

商品コード KQ-274C

150点入
3,500円 (税込3,850円)

緑茶のかほり

もぐさの香りに摘みためた緑茶の香りをプラスした香りが選べるお灸です。

はじめてのお灸 香木のかほり

商品コード KQ-270D

50点入
1,400円 (税込1,540円)

商品コード KQ-274D

150点入
3,500円 (税込3,850円)

香木のかほり
もぐさの香りに、ゆかしい白檀・桂皮・丁香をプラスした気品高い香りです。お灸のあとの残り香も印象的なお灸です。

4つの香りをいろいろ楽しみたい方へ

はじめてのお灸 4つのかほり

商品コード KQ-271

各25点入
3,000円 (税込3,300円)

はな、くだもの、香木、緑茶の香りをセット。
その日の気分で香りが選べるお灸です。

せんねん灸 アロマきゅう

商品コード KQ-269A

60点入
1,600円 (税込1,760円)

商品コード KQ-269B

20点入
800円 (税込880円)



間接灸（台座・紙管・他）の温熱目安表

※ 体感温度には個人差があります。表の示す温度は目安としてご参照ください。

温熱		45℃	50℃	55℃	60℃
せんねん灸	約41～42℃	はじめてのお灸 4つのかほり ▶ P38	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33
	約43℃	せんねん灸の 奇跡 ソフト ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33
	約41℃	せんねん灸の 奇跡 ソフト ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33
	約43℃	せんねん灸の 奇跡 ソフト ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33	せんねん灸の 奇跡 レギュラー ▶ P33
山正	約40～46℃	長生灸 ソフト ▶ P33	つば灸 NEO NEXT マイルド ▶ P36	つば灸 NEO NEXT レギュラー ▶ P36	長生灸 ライト ▶ P36
	約47℃	つば灸 NEO NEXT マイルド ▶ P36	つば灸 NEO NEXT レギュラー ▶ P36	長生灸 レギュラー ▶ P36	長生灸 お灸日和 フルーツ ▶ P33
	約50℃	つば灸 NEO NEXT マイルド ▶ P36	つば灸 NEO NEXT レギュラー ▶ P36	長生灸 レギュラー ▶ P36	長生灸 お灸日和 フルーツ ▶ P33
	約54℃	つば灸 NEO NEXT マイルド ▶ P36	つば灸 NEO NEXT レギュラー ▶ P36	長生灸 レギュラー ▶ P36	長生灸 お灸日和 フルーツ ▶ P33
釜屋もぐさ	約42℃	カマヤミニ ソフト ▶ P34	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 強 ▶ P34	カマヤミニ ハード ▶ P36
	約45℃	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 強 ▶ P34	カマヤミニ ハード ▶ P36
	約42～45℃	カマヤミニ ソフト ▶ P34	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 強 ▶ P34	カマヤミニ ハード ▶ P36
	約45℃	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 弱 ▶ P34	カマヤミニ 強 ▶ P34	カマヤミニ ハード ▶ P36
DAIWAKAN	約41～43℃	達磨（だるま） ソフト ▶ P35	達磨（だるま） マイルド ▶ P35	達磨（だるま） 弱 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35
	約43～45℃	達磨（だるま） マイルド ▶ P35	達磨（だるま） 弱 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35
	約45～47℃	達磨（だるま） 弱 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35
	約47～49℃	達磨（だるま） 強 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35	達磨（だるま） 強 ▶ P35
アイクレイ	約41℃	アイクレイ台座灸 ソフト ▶ P34	アイクレイ台座灸 マイルド ▶ P34	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34
	約44℃	アイクレイ台座灸 マイルド ▶ P34	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34
	約47℃	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 レギュラー ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34
	約50℃	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34	アイクレイ台座灸 ハード ▶ P34

警告

- 本品は火を使う特性上、どのタイプの商品でも火傷になる可能性があります。
- 火気の取扱いにご注意ください。火事の危険があります。ご使用後、消火を十分確認してから廃棄してください。
- 下向きに使用しないでください。燃焼温度が高くなり火傷や発火をする恐れがあります。また、傾けたり横向きで使用する場合も、燃焼温度が高くなりますので、火傷になる可能性が大きくなります。
- 万一、火傷ができた場合、また肌に異常が発生した場合は、ただちに使用をやめ、医師にご相談ください。

ご使用上の注意

- 熱さを強く感じるときは、肌からお灸をすぐに取り除いてください。火傷になります。その際、台座が非常に熱くなっておりますので、ご注意ください。
- 熱さの感覚は、人によって、またお灸する場所や季節で異なります。熱く感じなくても火傷になる可能性がありますので十分ご注意ください。
- はじめて使用される方やアレルギーのある方、皮膚の敏感な方は、使用中の皮膚の状態を注意深く観察してください。

■以下に該当する場合は使用しないでください。

有熱時、化膿症の方、傷や炎症のある部分（火傷・外傷・化膿など）、皮膚移植した箇所、刺青のある肌、肌に異常があるとき（皮膚炎・湿疹など）、発汗時やお風呂あがりなど肌に水分があるとき（水疱ができやすくなるので、よく乾かしてからご使用ください）、酒酔いのとき、体調がすぐれないとき、体力が低下しているとき。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン・
ピンセット

灸用品

検査・測定

滅菌消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マクラ

治療室
設備

模型・
ポスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理・
管理

テーピング
用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

熱+LEDの合体

ワンクリックで瞬時の温熱

火を使わずに灸感覚 一灸 (IKKYU) の登場により
治療の質を向上させます。

レーザー鍼と光灸療法 (ハロゲン光) から LED へ

一灸には、近赤外線LED 波長 870nm 220mwと赤色 660nm 7000mcdの2種類のLEDが使われており、ミトコンドリアの活性化、細胞内酵素の活性化、炎症抑制、痛みの緩和、育毛等、皮膚の老化防止に役立ちます。

また、美容灸的に使用も可能な低温から高温まで3段階の温度設定が出来る医療機器です。

■プロ仕様

ワンクリックで瞬時に熱刺激を出し連続して使用ができるため、施術効率が一段とよくなります。

■安全

火を使わず、火傷やベッドを焦がす心配がありません。ビル・マンションで治療する方には火災報知器を気にする必要があります。

■快適室内

煙がでないので、室内は年中快適です。

直接 温熱刺激温度

- L 低温 (緑色LED点灯) 47℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
 - M 中温 (黄色LED点灯) 51℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
 - H 高温 (橙色LED点灯) 60℃ 1回3秒間 / 長押し4.5秒
- ※L低温は美容用として使われる温度です。



デモンストレーション実施中
お気軽にお申し出ください

一灸 (IKKYU)

商品コード KQ-701

130,900円 (税込143,990円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00119000

使用環境温度: 0℃~40℃
定格: 6.0V×10W (アルカリ電池)
刺激面積: 約φ7mm 38mm²
寸法: 本体 180mm×φ26mm
電池ボックス 72mm×65mm×20mm
ケーブル長さ 150cm
重量: 約230g (電池含む)
近赤外線LED: 870nm 200mw (最大)
赤色LED: 660nm 7000mcd (最大)

【付属品】
単三アルカリ乾電池: 4本、
携帯用ポーチ: 1個
保証書、取扱説明書、
モグサエキス、
メディカルパッチ

保護キャップ付き



LEDの波長

近赤外線 LED
870nm 200mw (最大)
赤色 LED
660nm 7000mcd (最大)

東洋医学系医療従事者必携 スポットサマル刺激装置

●設定温度3段階

低温 60±2℃・約0.2秒/連続
中温 65±2℃・約0.4秒/連続
高温 70±2℃・約0.8秒/連続

- 連続モード
- 先端LED
- 消音モード



【付属品】
単三アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱説明書

バンシン プロ

商品コード KQ-702

81,400円 (税込89,540円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00118000

使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g (電池含む)

赤色LED

美容にひっぱりだこの赤色LED装着
瞬間発光が魅力。

接触部

皮膚に接して直接温熱刺激します。

温熱刺激調整

60℃・65℃・70℃の3段階設定。

スイッチ

スイッチを押すと瞬時に設定された温熱刺激が出力されます。

乾電池使用

単三乾電池を使用するので、どこでも施術できます。

バンシンプロの スタンダードグレード

●設定温度2段階

低温 60±2℃・約0.3秒
中温 65±2℃・約0.8秒

- 先端LED
- 消音モード



【付属品】
単三アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱説明書

バンシン ネオ

商品コード KQ-703

63,800円 (税込70,180円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00118A01

使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g (電池含む)

赤色LED

美容にひっぱりだこの赤色LED装着
瞬間発光が魅力。

接触部

皮膚に接して直接温熱刺激します。

温熱刺激調整

60℃・65℃の2段階設定。

スイッチ

スイッチを押すと瞬時に設定された温熱刺激が出力されます。

乾電池使用

単三乾電池を使用するので、どこでも施術できます。

家庭用・個人用 美容・健康関連 施術所向け セルフケア向け

●設定温度1段階

高温 65±2℃・約0.4秒

- 消音モード



【付属品】
単三アルカリ乾電池2本、
携帯用ポーチ1個、
保証書、取扱説明書

メイシン

商品コード KQ-706

45,770円 (税込50,347円)

〔クラスII〕 認証番号 228AGBZX00118A02

使用環境温度: 0℃~40℃
電池: 単3乾電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格: 3.0V、2.4W
刺激面積: 約0.7mm²
寸法: 180mm×φ26mm
重量: 約92g (電池含む)

音声調整出力表示

スイッチ ON/OFF

乾電池使用

単三乾電池を使用するので、どこでも施術できます。

先端部分はセラミック

電気のチカラでお灸治療



ピンポイントな
温熱刺激

見やすい液晶と お知らせ機能

業界初の現在温度のリアルタイム表示に加え、分かり易い通知音、消し忘れ防止機能が付いています。
※製販・製造：(株)村田製作所調べ



セラミック電子温灸器

商品コード KB-127A

ホワイト

商品コード KB-127B

ブラック

各 80,000円 (税込 88,000円)

〔クラスII〕 認証番号 229AKBX00029000

【定格電源】①本体：DC9V0.8A、内蔵電源：DC3.6V 2.2A (専用ニッケル水素充電電池) ②ACアダプタ：入力AC100V 50/60Hz 0.3A 出力DC9V 1.6A
【充電及び駆動時間】約60分充電で90分以上使用可能 (工場出荷時)
【タイマー】約30分 (30秒ごとに通知音が鳴ります)
【通知音】強/弱2段階
【サイズ】(長さ) 165×(幅) 31×(高さ) 37mm
【重量】約140g (ACアダプタ含まず)
【付属品】台座、専用ACアダプタ (充電用)、取扱説明書 (保証書付き)

設定は43℃から55℃まで3℃刻みで5段階あり、±1℃の精度で温度管理をするため、患者様の個人差や治療内容に合わせた施術が可能です。
※製販・製造：(株)村田製作所測定環境下において

灸用品 (灸用機器)



電子温ねつ灸

商品コード KQ-334

18,150円 (税込 19,965円)

〔クラスII〕

100V4W もぐさキャップ8個付



電子温ねつ灸用 もぐさキャップ

商品コード KQ-334B

12個入

1,870円

(税込 2,057円)

替えもぐさ ニンニクキャップ

商品コード KQ-334C

12個入

1,870円

(税込 2,057円)



特徴

- 低電圧 (12V) とサーモスタットで二重安全構造になっています。
- 温熱作用により皮膚に浸透し、深部まで暖めますので患部に快い深達力と即効性を持っています。
- 軽く小型で場所もとらず、保管、携行にも便利です。

びわの葉温圧器 ユーフォリア Q

商品コード KQ-336

80,000円

(税込 88,000円)

認証番号 220AGBZX00217A01

ユーフォリア Qはびわの葉の抽出液 (温熱効果液) と赤外線による温熱効果、温圧効果を加味して考案された温灸器です。
温灸器本体×2個、電源アダプター×2個、スタンド1個、接続用スリーブ1個、基本ツボ図1部、添付書類4種
※ご使用の際は別売のカセットが必要です。



オンキュー

商品コード KQ-338

ピンク

グレー

各 68,000円

(税込 74,800円)

〔クラスII〕

AC100V 3.0W
発熱温度97℃～76℃ (二段階切換)
長さ265×幅65×厚さ43mm
重量210g

使用説明ビデオ、小冊子付

オンキューは特殊な新素材セラミックスを使用した温熱治療器です。
熱の立ち上がりも早く、設定温度もやや高めのため、素早く治療が行えます。

手軽に温活

癒しの時間



ケース充電可能
本体コードレス

ハーバルキュー

商品コード KQ-460A

シルキーホワイト

25,000円 (税込 27,500円)

〔クラスII〕

設定温度 / 42℃・45℃・48℃
【本体】約W58×約D58×約H20.5mm 約29g
【充電ケース/ケースカバーセット時】
約W64.6×約D64.6×約H153mm 約312g

商品コード KQ-460B

ハーバルキュー専用 アロマパッチ32枚入

5,000円 (税込 5,500円)



全身温熱ケア

4つのタブレットで全身をマルチにケアすることができます。冷えが気になるスポットごとのトリートメントも可能、または4つ同時に使用で広く温めることも出来ます。

簡単3ステップ使いかた

STEP 1

STEP 2

STEP 3



アロマパッチの保護フィルムを剝がし、トリートメントしたい部分にパッチを貼ります。



本体をパッチ中央のマグネット部分に合わせ磁石でピッタリと装着します。



本体電源ボタンを2秒長押しするとトリートメントが開始します。
※20分後自動で停止します。

手軽に冷え対策をしたい人に

灸は科学の時代 施術/研究/教育の現場に必須アイテム。

業界初

施灸が目に見える業界初のシステム

施灸有効熱量の計算：灸が皮膚に与える熱量を表示
これまで、シミュレーションされていなかった施灸が人体に与える最も大きな効果である温熱の量を熱量シミュレーションし、人体への吸熱予測値を表示。
体温相当から最高温度に達するまでの時間を表示する。
一般的にこの時間が短いほど熱く感じます。

今までに なかった

できるだけ、もぐさの施術状態に近い温度変化を解析するために温度解析は、皮膚接触シミュレーション温度解析
できるだけもぐさの施術状態に近い温度変化を計測するためにも、もぐさ燃焼台を人体表面温度に近づけて測定 (24℃～39℃の間で1℃毎に設定可能)。皮膚表面温度が低い冷え性の方と、そうでない方との違いもわかります。



もぐさ燃焼解析システム MOXATH light (モクサス ライト)

商品コード KB-129

68,000円 (税込 74,800円)

170×86×36mm 280g

完全受注生産品

教育現場 必須機器

施灸温度と有効熱量を客観的数値で計測
測定結果は、PC上でグラフ化、比較、保存可能
計測結果はパソコン用に曲線グラフとして表示。
データ保存と読み出し、プリントが可能。
基準となる温度曲線との比較や連続施術時のバラつきなど客観的な評価が可能。

もぐさ・灸用品

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミバン、
ピンセット

灸用品
もぐさ

検査測定

滅菌消毒

オイル・
クリーム

ベッド・
マクラ

治療室
設備

模型・
ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理・
テーピング

用品

治療補助
用品

トレーニング

健康器具

開業準備

索引

灸用品 (灸用機器)

電子温灸器

CS-1000 CS-2000

ポイント
1

煙が出ない！

エアコン等の空調設備を傷めない。
警報器が鳴りだす心配がない。
ベッド、シーツを焼く心配がない。
煙のアレルギーのある患者がいる時も安心。
灸痕によるトラブルの心配がない。

ポイント
2

気持ちよさを再現

灸頭鍼の輻射熱を忠実に再現、
温灸・灸頭鍼特有の心地よさを患者
さまにご提供できます。

ポイント
3

どんな鍼でも

鍼は刺激度合いの弱い細番手の鍼や
銀鍼、金鍼も安心して使えます。

電子温灸器の特徴

- ①遠赤外線を照射することにより深部まで温めるので深部のコリに効果が期待出来ます。
- ②15秒毎に加温と休止を交互に繰り返すので、非常に気持ち良い刺激を感じられます。
- ③鍼の番手を選ばなくてもOK (細い鍼でも灸頭鍼以外でも)
- ④火を使った灸頭鍼と違い煙がでないので、患者様の衣服に匂いがつかず、治療室の壁も汚れません。
- ⑤火を使った灸頭鍼と比較すると直後は灸頭鍼のほうが熱いのですが、遠赤外線の効果により術後の保温持続時間は温灸器の方が長く温まります。

【輻射熱灸頭鍼の熱量を再現】

輻射熱による灸頭鍼の熱量を忠実に再現しました。

- ◎およそ5分で発汗作用が起こります。
- ◎7分～10分で直径6cmの発赤が残ります。



【発熱体】

温熱導子の発熱部にはセラミック粉末を練り合わせた、特殊シリコンカバーで遠赤外線波長を発振します。また発熱部には高感度センサーを組み込んであるので温度制御の応答性を良くしてあります。



CS-1000

移動や往診にも対応



CS-2000

鍼を刺入した状態で使用可能 灸頭針の輻射熱量を忠実に再現



電子温灸器CS-1000

商品コード KB-125

327,000円 (税込359,700円)

[クラスII/特管] 認証番号 223AGBZX00147200

- 医療機器の分類：電撃に対する保護の程度…BF形
- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：55VA
- 温度設定：44℃～50℃
5段階 (A 44.0℃、B 45.5℃、C 47.0℃、D 48.5℃、E 50.0℃)
- 間欠加熱周期：約30秒 (加熱15秒・冷却15秒)
- 観測装置：温度計・チャンネル切替方式
- 安全装置：センサー異常検出回路、灼熱板
- 本体寸法：W320×D230×H159 (単位 mm)
- 重量：7kg
- タイマー：ゼンマイ式30分タイマー (終了音付)
- 付属品：発熱導子4本、ヒューズ、六角レンチ



電子温灸器CS-2000

商品コード KB-115

550,000円 (税込605,000円)

[クラスII/特管] 認証番号 220AGBZX00136200

- 医療機器の分類：電撃に対する保護の程度…BF形
- 電源電圧：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：55VA
- 温度設定：44℃～50℃
5段階 (A 44.0℃、B 45.5℃、C 47.0℃、D 48.5℃、E 50.0℃)
- 間欠加熱周期：約30秒 (加熱15秒・冷却15秒)
- 観測装置：温度計・チャンネル切替方式
- 安全装置：センサー異常検出回路、灼熱板
- 本体寸法：W440×D310×H250 (単位 mm)
- 重量：10kg
- タイマー：ゼンマイ式30分タイマー (終了音付)
- 付属品：コードハンガー1組、発熱導子6本、ヒューズ、六角レンチ

別売品

(交換用) 発熱導子1本

商品コード KB-115B

9,000円 (税込9,900円)

【接触灼熱板】

皮膚に接触する部分は部分的な高熱や火傷防止の為、特殊精錬した銅版にクロームメッキをした灼熱板で熱の局部集中をなくしたものです。

熱の上昇、下降が忠実に再現される役目をもっています。
発熱体より発する遠赤スペクトルを皮膚に伝える為、花びらの模様の窓になっています。

【灸頭鍼と温灸鍼の比較】

両者とも腎俞 (左右) と大腸俞 (左右) 4点に10分間刺激を行い、終了後20分までを記録したものです。

灸頭鍼は刺激直後に鍼の直下を中心に全体的に温度上昇が見られたが、刺激終了20分後には刺激前値に復する傾向にあった。これに体し、電子温灸器CS-2000は刺激後20分後でも皮膚温の保温効果があることが確認できた。このことから、遠赤外線波長9.0μmを生体に発振する電子温灸器CS-2000の方が灸頭鍼より保温効果が優れていることがわかる。

(東洋医学とペインクリニック 1990年10月号より抜粋)

