



## 磁気加振式温熱治療器 ホットマグナー HM-2SC

商品コード KB-124

473,000円 (税込 520,300円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 15700BZZ01632000

### 仕様

形式	HM-2SC-A	HM-4	HM-2SC
電源	AC100V 50/60Hz クラスⅠ B形		
消費電力	340VA	740VA	280VA±10%
温度調整	40℃、50℃、60℃、65℃ 4段切替 (自動温度調整装置内蔵)	0℃、50℃、60℃ 3段切替 (自動温度調整装置内蔵)	
振動数/秒	50~120回		
寸法(mm)	450W×300D×205H	600W×315D×415H	450W×310D×205H
重量	12kg	24kg	13kg
専用台	W-60 (19.5kg)		

### 付属品

形式	HM-2SC-A	HM-4	HM-2SC
マグナーライトバック	LSP 2枚	LSP 4枚	LS 2枚 ※スーパーマグナーバック
マジックベルト	(小) 2本	(小) 4本	(小) 2本
電源コード		(2.5m) 1本	
検磁器		1コ	
バック受け金具		1コ	



※専用台W-60は別売

## 磁気加振式温熱治療器 ホットマグナー HM-2SC-A (2チャンネルタイプ)

商品コード KB-102

638,000円 (税込 701,800円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 15900BZZ0118000



※専用台W-60は別売

## 磁気加振式温熱治療器 ホットマグナー HM-4 (4チャンネルタイプ)

商品コード KB-103

946,000円 (税込 1,040,600円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 15700BZZ01633000

## 体の芯からじっくり解きほぐす、信頼の温熱治療法。

磁気+振動+温熱治療で細胞を蘇らせる

### 主な特長

マグナーバックから、交番磁力線特有のマイクロバイブレーション(微振動)が患部を快く刺激。あわせて体の芯までじっくり温める温熱との相乗作用で、健康の源をやさしく解きほぐします。

### マイクロバイブレーション+温熱との相乗作用

マグナーバックから、交番磁力線特有のマイクロバイブレーション(微振動)が患部を快く刺激。あわせて体の芯までじっくり温める温熱との相乗作用で、健康の源をやさしく解きほぐします。

### 保温回路を内蔵、瞬時に治療可能

### 温度設定は4段切替え、見やすい表示 (HM-2SC除く)

温度は40℃、50℃、60℃、65℃の4段階。オートレギュレーション機能が設定温度を維持します。(HM-2SCは45℃、50℃、60℃の3段階)

### 衣服を脱がずに治療OK

従来の温熱パックと異なり、衣服の上からでも治療効果は変わりません。スペース・時間を大幅に節約します。

### 体の深部まで温めて、治療効果が長く持続

### 微振動で患部に快適な刺激

### 使い易さを追求したシンプル操作・安全設計

### ランニングコストがグンと経済的

消費電力が少なく、マグナーバック1本あたり1日約20円程度の電気料金ですみます。



## 乾式ホットパック装置 ホットリズムー MHR-2f (2人用タイプ)

商品コード KB-254

480,000円 (税込 528,000円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 229AABZX00070000



## 乾式ホットパック装置 ホットリズムー MHR-4f (4人用タイプ)

商品コード KB-253

735,000円 (税込 808,500円)

〔クラスⅡ/特管〕 認証番号 229AABZX00070000

## 進化した リズムモード

コ柔軟性を持たせたリズムーパックですが、従来のリズムを継承しただけでなく、さらに強い「ターボ」機能を実現しました。これまでよりも患者様の好みに合わせた治療を提供できます。



ターボ

off



ターボ

on

## 主要な治療部位すべて に1つで装着可能

従来機では部位ごとにパックを交換して治療をしていましたが、温熱治療の主要部位である「腰・膝・肩」を1つのパックで装着でき、フィットするようにパックカバーを開発しました。

### かんたん装着

パックカバーをバンドと一体にし、持ち手や2つのオス面ファスナーを備えたことで、装着がより簡単にできるようになりました。

### 省エネ設計

リズムーパックfは断熱構造により、空気中へ余分に放出していた熱を抑え、治療面に伝わる熱の割合を増やしました。同じ温度を維持するために必要な消費電力を40%削減しました。

	MHR-4f	MHR-2f
電圧保護	クラスⅠ 機器 B形装着部	
電源	AC100V 50/60Hz	
電源入力	150VA	100VA
出力ch数	4ch	2ch
定格温度	55℃ (パック表面温度)	
ヒーター出力表示	弱ー中ー強 (5段階)	
治療時間	1~30分 (1分単位)	
リズムモード	連続・間欠(ターボ) (最大振動加速度9.8m/s <sup>2</sup> 以下)	
外形寸法	幅470×奥行490×高さ1,100mm	
質量	22kg	21kg
付属バック	リズムーパックf(標準)×4	リズムーパックf(標準)×2





## フィジオパックウォーマー

商品コード KB-569

688,000円  
(税込756,800円)


本体寸法	W505×H765×D430 (mm)
庫内寸法	W420×H560×D320 (mm)
本体重量	44.1kg (本体38.5kg、 トレイ5.6kg)
庫内容量	75L
温度調節幅	40℃～75℃ (加温防止装置付)
付属品	トレイ7枚、 電源ケーブル1本



## 収納の手間を省く7段トレイ

ウォーマーは、1段にフィジオパックMを3枚並べて収納できる7段のトレイを標準装備。  
パックを重ねたり、奥へ詰め込む事なく簡単に整理できます。余裕のある棚間で取り出しも収納もスムーズに行えます。

※フィジオパックは 付属していません。

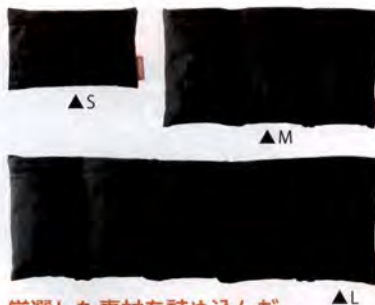

## 厳選した素材を詰め込んだ 鉱石ホットパック

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合を調整しました。

<b>ブラックシリカ</b> black silica 海底に堆積した珪藻類から生成された黒鉛を含む珪質岩石。	<b>ゼオライト鉱石</b> zeolite 吸着・吸湿性に優れ、脱臭剤としても利用される、多くのミネラルを含んだ鉱石。
<b>ゲルマニウム鉱石</b> germanium 元素のひとつゲルマニウムを含有する鉱石。	<b>テラ鉱石</b> tera stone 岩盤浴などにも使用される密度の高い天然鉱石。
<b>トルマリン</b> tourmaline トルマリンの結晶を熱すると電気を帯びる事から日本名で「電気石(てんきせき)」と呼ばれる鉱石。	<b>磁セラミックボール</b> ceramic ball 鉱物などを粉状にした原料を球体に成形して焼き上げた磁器。

## フィジオパック

商品コード KB-570A

S  
5,800円 (税込6,380円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0001  
W165×H105mm 重量 260g

商品コード KB-571A

M  
12,800円 (税込14,080円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0002  
W270×H150mm 重量 940g

商品コード KB-572A

L  
18,800円 (税込20,680円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0003  
W585×H150mm 重量 1300g

商品コード KB-584A

LL  
25,800円 (税込28,380円)

医療機器届出番号 11B1X10028PP0004  
W350×H310mm 重量 1500g

## フィジオパックカバー

商品コード KB-570B

S (交換用カバーのみ)  
1,000円 (税込1,100円)

商品コード KB-571B

M (交換用カバーのみ)  
2,200円 (税込2,420円)

商品コード KB-572B

L (交換用カバーのみ)  
2,800円 (税込3,080円)

商品コード KB-584B

LL (交換用カバーのみ)  
5,000円 (税込5,500円)

## 温熱治療をもっと手軽に

フィジオパックは、所定の温度に温まったらウォーマーから取り出して患部にあてるだけ。心地良い適度な重みと温感が広がります。手間のかかるメンテナンスや準備にかかる作業も無く、温熱治療が手軽に行えます。



## ハイドロタイザー

商品コード KB-614

HC-5U  
800,000円 (税込880,000円)

(クラスI) 27B2X00088000016

商品コード KB-615

HC-6U  
980,000円 (税込1,078,000円)

(クラスI) 27B2X00088000017

商品コード KB-635

HC-7U  
1,150,000円 (税込1,265,000円)

(クラスI) 27B2X00088000018

機種	HC-5U	HC-6U	HC-7U
電撃保護	クラスI 機器		
電源	AC100V 50/60Hz		
電源入力	1,300VA		
水温設定範囲	45～95℃		
本体幅 (ハンドル含まず)	475mm	675mm	875mm
本体奥行 (ホース掛け含まず)	550mm		
本体高さ (フタを開けた状態)	836mm		
本体質量 (水、パック含まず)	40kg	57kg	70kg
標準使用水量	60L	90L	120L
付属品	引き上げ金具、バックスタンド、バック仕切、 ハンドル、排水ホース、ホース掛け		

## トータルでより快適な湿性温熱療法をサポート

### 安全性を追求した機能を充実 (3機種標準装備)

#### L型3Pプラグの採用

コンセントの接触不良によるトラッキング現象、感電、漏電といったトラブルを回避するために、L型3Pプラグを採用しました。(壁側コンセントには接地型コンセントを推奨しています。)

#### 水不足を検知する 機能を装備

低水位時には水不足ランプで警告するとともにブザーでお知らせし、ヒーターを自動停止。空焚きを防止します。

#### 高温ランプ

槽内温度が設定温度よりも5℃以上高くなると、高温ランプが点灯します。同時にブザーでもお知らせします。



## ミナトパック

① 小	140×340mm	KB-542	3,300円 (税込3,630円)
② 中	280×340mm	KB-543	4,900円 (税込5,390円)
③ 大	280×510mm	KB-544	5,900円 (税込6,490円)
④ 特大	447×564mm	KB-545	11,000円 (税込12,100円)
⑤ 首用	タオルカバーなし	KB-546	5,000円 (税込5,500円)
	タオルカバーつき	KB-547	8,500円 (税込9,350円)
	タオルカバーのみ	KB-548	3,500円 (税込3,850円)
⑥ 肩用	タオルカバーなし	KB-549	12,000円 (税込13,200円)
	タオルカバーつき	KB-550	17,500円 (税込19,250円)
	タオルカバーのみ	KB-551	5,500円 (税込6,050円)

※この商品は布製のため、サイズが多少異なる場合があります。



カナホットは特殊セラミックにより体に合った赤外線を出し温めます。

気持ち良さには理由がある。

染み込むような熱がきます。

**カナホット**  
**モイスト** 日本製

### 湿熱の特殊カバー

冷えると空気中の水分を吸収する「カナホットオリジナルカバー」本体にヒーターにより本体の温度が上がると、カバーに含まれた水分が発散され、体の芯にジワジワしみ込むような気持ちのよい湿熱を体感できます。

※水洗いはできません。ドライクリーニング専用です。

### 赤外線を出すセラミック板

温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により、気持ちのよい波長の赤外線温熱が放射されます。

### 大型パックであらゆる曲線にフィット

大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等あらゆる曲線にフィットできる強度に設計。

### 最大80Wの省エネ設計

電熱器具は消費電力が心配と思われるのですが、これだけの熱量を80Wで効率よく伝えるのはカナホットモイストだけ。



### カナホットモイスト

商品コード KB-248

54,000円(税込59,400円)

[クラスII] 認証番号 16300BZZ01121000

定格電圧: AC100V (50/60Hz)

消費電力: 80W

時間設定: 60分タイマー(ゼンマイ式)

温度設定: 40℃以上70℃以下(自動調整)

寸法重量: 本体サイズ 約38cm×62cm

重さ 約900g

カバーのサイズ 約43cm×73cm

重さ 約500g

安全装置: 本体に蔵サーモスタット

内容物: 本体(パック)、電源スイッチ(60分タイマー)、スベアーカバーを含む2枚、取扱説明書(保証書添付)、添付文書、ユーザー登録はがき

### モイストカバー

商品コード KB-248B

3,200円(税込3,520円)

サイズ: 約43cm×73cm

しつねつ  
“湿熱感”を持続させる特殊カバーを使用



※カナホットモイスト、カナホット(大)(中)(小)は

●患部にのせての使用になります。 ●温度調節はできません。

## カナホット

からだの芯から温めます

日本製

カナホットは特殊セラミックにより、体に合った赤外線を出し温めます。

### 効能効果

- 疲労回復
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和
- 血行をよくする
- 痛みの緩和
- 筋肉の疲れをとる
- 胃腸の働きを
- 筋肉のこりをほぐす
- 活発にする



### カナホット替カバー(1枚)

商品コード KB-225B

大 カバーのサイズ: 約56×28.5cm、カバーの重さ: 約70g

商品コード KB-220B

中 カバーのサイズ: 約48×28.5cm、カバーの重さ: 約58g

商品コード KB-224B

小 カバーのサイズ: 約38.5×27.5cm、カバーの重さ: 約40g

各 1,500円(税込1,650円)

カナホットのカバー生地は内部からの熱で空気中の水分を吸収しますので湿性パックの応用になります。

### サイズ比較



### カナホット

[クラスII] 認証番号 16300BZZ01121000

商品コード KB-225

大

45,000円  
(税込49,500円)

本体サイズ: 約55×28cm  
付属カバーのサイズ:  
約56×28.5cm  
カバー・タイマーを  
含む総重量: 約1,100g

商品コード KB-220

中

42,000円  
(税込46,200円)

本体サイズ: 約46×28cm  
付属カバーのサイズ:  
約48×28.5cm  
カバー・タイマーを  
含む総重量: 約1,000g

商品コード KB-224

小

26,000円  
(税込28,600円)

本体サイズ: 約38×27cm  
付属カバーのサイズ:  
約38.5×27.5cm  
カバー・タイマーを  
含む総重量: 約750g



カナホットのカバー生地は内部からの熱で空気中の水分を吸収しますので湿性パックの応用になります。

- 定格電圧: 100V
- 定格消費電力: 80W
- 内部温度70℃(小のみ60℃)
- 表面温度50℃～60℃
- 60分タイマー付





## カナホット ベストタイプ

商品コード KB-226  
48,000円 (税込52,800円)

〔クラスII〕  
定格電圧：100V  
定格消費電力：80W  
内部温度：70℃  
表面温度：50～60℃  
60分タイマー付  
寸法：48cm×44cm  
カバー・タイマーを含む総重量：  
約1,100g

※ 替えカバーはございません。

- フリーサイズで肩・背中にピッタリフィット！  
特殊編込みのマジックバンド、熱や汗に強く長持ちいたします。
- 肩のこり・背部の疲れにはカナホットベスト用。

首、背中の重要なツボに特に温効果を上げる為、セラミックスを内蔵。  
肩、首のこり、疲労回復におすすめします。



## カナホット 関節用

商品コード KB-237  
38,000円 (税込41,800円)

〔クラスII〕  
定格電圧：100V  
定格消費電力：80W  
内部温度：70℃  
表面温度：50～60℃  
60分タイマー付  
寸法：39cm×28cm  
カバー・タイマーを  
含む総重量：約800g

※ 替えカバーは  
ございません。

関節用



## カナホット ベッド用

商品コード KB-221  
48,000円 (税込52,800円)

〔クラスII〕  
定格電圧：100V  
定格消費電力：70W  
内部温度：60℃  
表面温度：45～50℃  
60分タイマー付  
寸法：約145cm×40cm  
重量：約1,100g

## カナホット ベッド用カバー

商品コード KB-221B  
3,000円 (税込3,300円)

寸法：約148cm×41cm 重量：約240g



## 治療ベッド用 ホットパック BC-120

商品コード KB-215  
40,000円 (税込44,000円)

53×140cm  
直接電源差込式、  
温度調節付。



## サンホットHC

商品コード KB-216  
26,500円 (税込29,150円)

〔クラスII〕  
AC100V マジックベルト付  
70℃までの温度調節ができます。  
24×33.5cm



FA-I

## 遠赤外線湿熱器 フィットアンポFA-II

商品コード KB-255  
68,000円 (税込74,800円)

〔クラスII〕 承認番号16200BZZ00524  
外形寸法：約W690×D390×H15mm  
重量：1.9kg  
消費電力：150W

## 遠赤外線湿熱器 フィットアンポFA-I (ハーフ)

商品コード KB-256  
48,000円 (税込52,800円)

※ こちらは医療機器ではありません。  
外形寸法：約W390×D410×H15mm  
重量：1.0kg  
消費電力：115W

【共通仕様】  
電源電圧：AC100V 50/60hz  
本体表面温度：70℃±10℃  
付属品：替えカバー  
生産国：日本  
サーモスタット搭載  
※ タイマーなし



湿熱は適度な湿り気を帯びているため、皮膚の乾燥がなくしっとりとなめらかな肌を保ちます。この保湿作用は、同時に喉の乾きを少なくし、快適な使用感を実現しています。

①お湯のいらない湿熱パック  
フィットアンポ内の特殊ヒーターにより特殊合金が加熱され高温になります。これによる温度差の違いで空気中の湿気をネルカバーが吸収し湿熱となります。

②抜群のフィット感  
フィットアンポはネルカバーのしなやかさとともに持ったときにちょうど良い重さを感じます。実はこの重さが抜群のフィット感をもたらす秘密。内部のヒーター線の間にバランスよく配置された特殊合金により、体のどの部分へもフィットするよう工夫されています。

③遠赤外線セラミックシート  
フィットアンポは熱感を高める特殊合金とともに独自開発の「遠赤放射セラミックシート」を採用しています。このセラミックシートは、遠赤外線効率よく放射し、特殊合金により蓄えた熱とともに体の芯まで温めます。

④大判サイズ  
一般的な湿熱アンポは約30cm×40cm、これに対しフィットアンポは39cm×69cmと方々腰も楽に覆える大判サイズ(当社比)だから、ムラなく全体を温めることができます。

⑤綿フランネル素材  
しっとり、しなやかを実現する秘密は専用の「綿フランネル素材」。毛足を長く起毛させた綿糸を平織りで織り上げ、独自の風合いとしなやかさをもたせています。この起毛した綿が空気中の湿気を吸い取り、しっかりと、やわらかな湿熱を可能としました。

## しっとり、しなやか快適な湿熱 遠赤放射セラミックシート湿熱器

アンポとはもともと湿熱治療のことです。タオルを熱湯につけ、これを絞って患部に当てるのをアンポと言っていました。このようなアンポが1世紀以上も間、痛みや不快を鎮めるために使用され、今日でもこの湿熱治療が、病院の物理療法室やリハビリ施設、接骨院、鍼灸治療院カイロプラクティック院、整体治療院、一般家庭にて行われています。

鍼

小児鍼

粒鍼

アルコール

カミセット

もくせき

検査測定

滅菌消毒

オイル

ベッド

治療室

ボスター

吸玉

治療器

温熱

健康管理

テレーン

治療補助

トレーニング

健康器具

開業準備

索引



用途別・部位別に使いやすい4種類のサイズ



【M】 掌・足裏などに使えるM  
【L】 背部・膝などに万能なL  
【2L】 腰部など大きな場所には2L  
【首・肩】 首・肩は専用の使いやすい形状



「温める」と「冷やす」どちらも使える  
自然の粘土で作られた再利用可能なパック

CIANA クレイパックは、温熱療法とアイシング、どちらも使える優れものです。温めるときは電子レンジ、冷やすときは冷蔵庫・冷凍庫を使用して手軽に切り替えられ、再利用が可能です。非毒性のナチュラルクレイがたっぷり入っているため、患部にフィットするようにしっかりと変形させられます。また、カバーには身体にぴったりと吸い付くような快適な生地を使用。効率的な施術のサポートとして、ご使用ください。

CIANA  
クレイパック

商品コード KB-580  
ホット&クール Mサイズ  
2,400円 (税込2,640円)  
25×12.5cm 320g

商品コード KB-581  
ホット&クール Lサイズ  
3,000円 (税込3,300円)  
30×18cm 700g

商品コード KB-582  
ホット&クール 2Lサイズ  
4,200円 (税込4,620円)  
35×27.8cm 1700g

商品コード KB-583  
ホット&クール 首、肩用  
3,000円 (税込3,300円)  
58×15cm 850g

カバー素材：PVC、ポリエステル  
内部素材：ナチュラルクレイ  
製造国：中国

肘や肩など  
広い部位に

Baria Hot

●大きなサイズなので広い面を身体に当てて使います。

腕や脚に

Baria Hot・ハーフ

●腕や脚に使用しやすいスリムなサイズ。  
●2個組なので両脇に当てるなど効果的に使用できます。

専用カバーを使用して  
様々な部位に

Baria Hot・ダブル

●身体にしっかりと固定できる専用カバー付き。

透析時の血管痛の緩和、化学療法における痛みの緩和などに。

タオルウォーマーで  
温めるから  
安全・簡単・低コスト

保温時間  
**4～5時間**

加熱・蓄熱した温熱効果により患部を温め、消炎鎮痛処置を行います。

●バリア性に優れた抗菌アルミフィルム  
●柔らかく身体にフィット

温熱剤／日本製  
カバー／中国製

電子レンジや湯煎等はご使用できません。タオルウォーマー専用です。

バリアホット

商品コード KB-577  
バリアホット  
2,000円 (税込2,200円)  
[クラスⅠ] 24B3X00004000004  
180×260mm 700g  
専用カバー付

商品コード KB-578  
バリアホット・ハーフ  
2,200円 (税込2,420円)  
[クラスⅠ] 24B3X00004000012  
110×260mm 300g×2  
パック2個+専用カバー2個

商品コード KB-579  
バリアホット・ダブル  
3,960円 (税込4,356円)  
[クラスⅠ] 24B3X00004000013  
180×260mm 700g×2  
パック2個+専用カバー

ガン性疼痛の緩和  
排便・排ガスの促進  
血管痛の緩和  
血管拡張

電子レンジ使用  
温冷どちらでも使えるやわらかパッド  
ホット&クールパッド ●電子レンジで1～2分(40℃) ●冷凍庫約1時間

**Sサイズ**

Lサイズの約2分の1のサイズ。コンパクトになっても用途は様々。ちょっと肩を温めたり、脇を冷やせば急な発熱に効果的。熱中症対策にも使用できます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

**LLサイズ**

Lサイズの約2倍の大きさ。温湿布・アイシングなどは広範囲に使用できますのでさらに効果的。ほどよい重さで暖かさでリラックスできます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

**Lサイズ**

冷温湿布に使えるやわらかパッド。温湿布は電子レンジで加熱し約40度の温度で患部を緩和。冷湿布は冷凍庫に入れ使用。ジェルは凍らないので、やわらかいまま使用できます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

**首肩用**

冷温湿布に使えるやわらかパッド。温湿布は電子レンジで加熱し約40度の温度で患部を緩和。冷湿布は冷凍庫に入れ使用。ジェルは凍らないので、やわらかいまま使用できます。2重構造で安心です。特殊加工コーティングで、温めた時のゴム臭さを無くしました。

ホット&クールパッド

商品コード KK-725  
グリーンSサイズ  
1,200円 (税込1,320円)  
12×29×2cm 重量 約350g

商品コード KK-726  
グリーンLサイズ  
2,200円 (税込2,420円)  
20×30×2cm 重量 約760g

商品コード KK-727  
グリーンLLサイズ  
3,600円 (税込3,960円)  
33×40×2cm 重量 約1200g

商品コード KK-728  
グリーン首肩用  
2,400円 (税込2,640円)  
17×53×1.5cm 重量 約600g

【表地】ポリエステル65%・コットン35%  
【裏地】天然ゴム100%  
【内袋】ナイロン100%  
【フチ布】ポリエステル65%・コットン35%  
【ジェル】セルロース100%



お湯で加温



ホットパック M

商品コード KB-539  
**3,400円 (税込3,740円)**  
 (クラス I) 27B3X00302000001  
 サイズ: H180×W380 (mm)  
 材質: ATBC-PVC  
 日本製

温熱効果に最適!

- 温熱療法に最適。柔らかく体にフィットします。
- 腰・腕・膝など患部に合わせてご使用いただけます。
- 従来のホットパックのように水滴がでにくく、水はけがよい生地を使用していますので、衣服などを濡らさずに済みます。
- 保温時間も20分くらい維持できます。

お湯で加温



ホットパック L

商品コード KB-538  
**3,800円 (税込4,180円)**  
 (クラス I) 27B3X00302000001  
 サイズ: H260×W380 (mm)  
 材質: ATBC-PVC  
 日本製

- 本品は身体の局部(肩・腰・膝など)を温めるものです。それ以外の目的には使用しないでください。
- 本品は80度以下のお湯で十分加温してからご使用下さい。
- お湯以外での加温は破損の恐れがありますので絶対におやめ下さい。
- 本品を十分に加温されると非常に熱くなります。やけどの恐れがありますのでお取り扱いに十分ご注意ください。
- 本品で身体を温める際、タオル等で包むなどして直接皮膚に当てないで下さい。
- 本品で身体を温める際、長時間の使用はやけどの恐れがありますので十分ご注意ください。
- 使用期間は原則的に1,000時間又は4か月以内でご使用下さい。

電子レンジ使用



スチームホット C-600N

商品コード KB-611  
**製造終了**  
 480×160mm、約600g

- 加熱はワンタッチ
- 使い易い、優れた耐久性
- 臭いがしない
- マルチタイプ
- いつも清潔に洗濯可能
- 温泉水も使用可能
- 連続使用可能



簡単で清潔に使用できる全く新しい湿性ホットパックです。

スチームホットは、耐熱性特殊アラミド繊維で袋状に縫製されています。内部には新たに開発された、特殊セラミックビーズが充填され、自重の30%を超える水分を保持放出します。

電子レンジ使用



スチームホット アイン

商品コード KJ-890  
**製造終了**

湿ったホカホカ、湿った冷え冷えで目の健康をリードする。

現代の仕事はパソコン抜きでは語れません。毎日パソコンに向かって目を酷使する結果、目が疲れる、乾く、花粉症、そんな時に「スチームホットアイ」をご使用下さい。「スチームホットアイ」は空気中の湿度を吸収し何度でも湿熱、湿冷熱を利用できます。

- 1日に何度でも連続使用できます。
- 洗濯が可能です。
- 大量に放出する湿度を保持しています。
- 無臭です。
- 加熱は最速です。
- 冷蔵庫での冷却は堅くなっていればOKです。

電子レンジ使用



モイストヒートパック スタンダード

商品コード KJ-540A  
**6,800円 (税込7,480円)**  
 サイズ: 23×30cm  
 どこにでもフィットする万能型。

電子レンジ使用



モイストヒートパック ネックラップ

商品コード KJ-540F  
**8,800円 (税込9,680円)**  
 サイズ: 23×52cm (湿熱面)  
 ●リボンを結んで首筋に  
 ●腰に  
 ●リボンを解いて両肩を覆って

お湯で加温



アクアゲル ホットパック HP-03 (大)

商品コード KB-610A  
**4,500円 (税込4,950円)**  
 Lサイズ 300mm×340mm

ホット専用

スピーディ!

加熱時間が、100℃で1分、80℃で約3分(再加熱 約1分)ポータビリティに優れた**超スピード加熱タイプ**。(在宅・業務用)乾・湿、いずれにも対応。専用カバー付。

お湯で加温



アクアゲル ホットパック HP-11 (大)

商品コード KB-610C  
**4,500円 (税込4,950円)**  
 Lサイズ 300mm×340mm

アクアゲル ホットパック HP-11 (小)

商品コード KB-610D  
**3,500円 (税込3,850円)**  
 Sサイズ 130mm×340mm

冷 暖 兼用!

コールドバック・ホットパックの2ウェイタイプ。冷凍庫に入れたままでも凍りません。専用カバーで露付による不快な濡れもなし。もちろんホットパック(加熱時間1〜3分)として使用可能。ホット・コールド専用カバー付。





湯せん  
タイプ  
温度  
調節



## ストーンセラピー用石 50 STONE SET

商品コード KB-518

50,000円  
(税込55,000円)

単品  
ストーン

Large	8個
Medium	16個
Small	16個
Toe	8個
Trigger	2個
合計	50個

## ストーンセラピー スタンダードKIT

商品コード KB-516

110,000円 (税込121,000円)

セット内容: HS-12N (SW) / 50 STONE SET  
※単品での購入も可能です。

はじめて導入をお考えのサロン様には  
お得なセット品がおすすめです。

ストーン  
セラピー  
導入キット

## ストーンセラピー用 ウォーマー ホットシステム HS-12N (SW)

商品コード KB-517

75,000円 (税込82,500円)

単品  
ウォーマー

温度計・スノコ付

定格電圧	単相 100V 50/60Hz	外形寸法	W427×D297×H200 (mm)
消費電力	720W	庫内寸法	W372×D262×H114 (mm)
温度調節	可変式サーモスタット	庫内容量	12L
温度範囲	標準温度 40~80℃	質量	6kg
安全装置	温度ヒューズ	付属品	スノコ/温度計/変換プラグ



美容  
促進

健康  
促進

体内の老廃物を  
汗とともに体外へ

※イスは  
別売です。

▲アイボリー色

## ゲルマニウム四肢温浴装置 NEW ゲルマくん

商品コード KJ-452

580,000円 (税込638,000円)

本体寸法 (幅/奥/高): 680×610×970 (mm)  
本体重量: 約22kg  
ゲルマニウム浴液容量: 20L~30L  
低格電圧: 100V 低格周波数: 50Hz/60Hz  
低格消費電力 (電動ポンプ): 35W  
低格消費電力 (ヒーター): 800W  
安全装置: 自動式サーモスタット (温度過  
昇防止装置) 漏電ブレーカー

### こんな方におすすめ

- 体を温め、健康を維持されたい方
- 発汗により、ストレスを緩和されたい方
- 心臓に負担をかけずスポーツ感覚を楽  
しみたい方
- 冷えからくるさまざまな症状を緩和され  
たい方
- 体内に蓄積した有害物質を汗とともに  
対外に排出されたい方

### 使い勝手の良いデジタル仕様

SSR方式 (無接点リ  
レー方式) を採用。  
高い温度制御精度と耐  
久性を両立させました。



## 流動パラフィン

商品コード KB-504

250cc  
2,000円 (税込2,200円)

250ccプラスチック容器入り  
流動パラフィンを少量混入し  
ておくことによって、患部の  
パラフィン膜をきれいにとり  
のぞくことができます。



## 薬用オンセンス

商品コード KB-421

1.4kg 缶  
2,500円 (税込2,750円)

商品コード KB-422

700g 缶  
1,400円 (税込1,540円)

各1ケース10缶入



## 上肢向け温浴療法用装置 パイサイザー BT-3N

商品コード KB-629

1,080,000円 (税込1,188,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 224AIBZX00064000

電撃に対する 保護の形式に よる分類	クラスI 機器
電撃に対する保 護の程度による 装着部の分類	B形装着部
定格電源電圧 及び周波数	AC100V 50/60Hz
電源入力	900VA
噴出吐出力	33L/min (×2基)
噴出気泡量	14.6L/min (×2基)
噴出圧力	120kPa
湯温	35℃~45℃
治療タイマー	1分~99分
精度: 設定時間の±5%	
槽内寸法及び 容量	W505×D275×H200mm 約22L (オーバーフローまで)
質量	40kg

上肢  
浴用

流量を3段階で調節し、  
低刺激治療を可能にした  
温浴療法用装置

流量可変機能採用	排水方法の選択不要	浴槽内湯温の均一化
可変式ノズル	4種類の噴流パターン	オーバーフロー



## 過流浴装置 ワールプール (下肢用) WP-800

商品コード KB-636

1,940,000円 (税込2,134,000円)

(クラスII/特管) 認証番号 228AIBZX00024000

寸法	外形/1285 (D) × 570 (W) × 1040 (H) mm 内径/650 (L) × 300 (W) × 620 (H) mm
容量	浴槽/約78L (適量レベル)
材質	浴槽/FRP、カバー/プラスチック (ABS)、フレーム/ステンレス、 座面/FRP、手すり/ステンレス
質量	約79kg
最大使用者体重	100kg
電源	単相100V (50Hz/60Hz) 15A アース付
噴流 ポンプ	出力400W、吐出量: 110L/min (50Hz)、 130L/min (60Hz)
保温ヒーター	560W
電源入力	1.5kVA
ノズル	5個
エア・調整ノズル	1ヶ所
治療時間	最大40分 (デジタル表示)
温度調節	最大45℃ (デジタル表示)
排水	ボタン操作
安全装置	漏電遮断器、空焚防止 (水位センサー)
付属品	保護マット、ノズルスターナー、ノズルスターナー

膝、足関節、ハムストリングスに  
可動域訓練可能な過流浴装置。

膝まで治療できる深い浴槽  
無理な姿勢をとることなく、確実に膝に噴流を  
当てることができます。  
また水深も深く、ペダリング訓練や立位での下  
肢荷重訓練などもあわせて行うことができます。

移乗しやすさにこだわりました  
座面奥行きは太柄な患者様も移乗しやすい  
40cmのワイド設計。  
患側だけ水中に入れる場合でも、サイドグリップ  
を掴むことで安定した姿勢で移乗できます。