

■ 豊富なレザーカラーと環境への配慮

人気の高い豊富なカラーバリエーションをラインナップし、環境にも配慮したレザーを積極的に採用しています。

[詳細P4-5-6]

■ 国際品質規格ISO9001&ISO14001取得

■ 国内生産工場だからご購入後も安心

購入前、購入後のサポートも充実。ISO取得工場での生産、メンテナンスなので、末永く製品をご愛用いただけます。

[詳細P389]

お客様専用のフリーコールでは、製品についてのお悩みに専任の担当者がご回答いたします。

お客様相談室 [平日9:00~17:00]

 0120-62-2382

ご注文や価格等に関するお問い合わせには
一切お答えできません。予めご了承ください。

※お買い求めは販売代理店にお申し付けください。

■ 心地よさを高めるカラー&デザイン


高性能な18色のオリジナルレザーを標準として、様々なご要望に応じたカラー や素材を空間コンセプトに合わせてお選びいただけます。人にやさしい色合いと、人間工学に基づく先進のフォルムは心地よさを導き、空間の価値を高める大切な要素となっています。

■ パフォーマンスの高さが可能性を広げる

人が扱うことを前提とした「使いやすさ」、そして機能やデザイン、環境へのこだわりや安心して使っていただくための品質に関して、妥協を排し、より高い次元の製品づくりを具体化しました。豊富なコーディネートバリエーションが、さまざまなニーズに対応し、新たなワークスタイルの可能性を広げます。

好みのフレームペイントカラー8色よりお選びいただけます。

カラーバリエーション

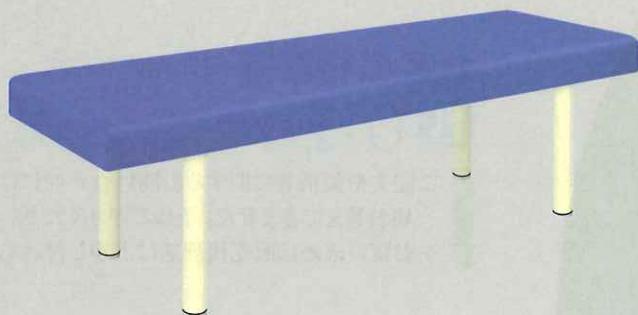

Original Color

オリジナルカラー 標準

標準粉体塗装色

ストレスを感じさせない人肌に最も近いアイボリー色です。温もりのある長く愛され続ける色調は、医療機関向けに最適です。



White

ホワイト 有料



Blue

ブルー 有料



Red

レッド 有料



Orange

オレンジ 有料



Pink

ピンク 有料



Brown

ブラウン 有料



Chocolate

チョコレート 有料

Merit 粉体塗装の特徴

粉体塗装とは、高分子合成樹脂を主成分とした塗膜形成要素のみを粉末状にした粉体塗料を溶融コーティングすることにより従来の溶剤塗装の「塗る」よりさらに美しく、より強い塗膜を形成する塗装方法です。

Point1 高品質

粉体塗装は、塗料に使用される高分子樹脂の特性によって、高膜厚で優れた塗装強度・耐化学薬品性・耐食性・耐候性を保持します。

Point2 低公害性

粉体塗装に使用される塗料は無溶剤であるため、溶剤揮発に伴う大気汚染・火災・中毒などの危険性が少なく、環境問題に対応した塗装方法です。

別料の粉体塗装色でご注文いただく場合の納期▶ご注文後、土日・祝日を除く10~15日後の出荷となります。予めご了承ください。

オリジナルレザー [18色よりお選びいただけます。]

標準



Original Leather

メディカル専用として開発された
実績のあるベーシックなビニルレザーです。

ソフトレザー [8色よりお選びいただけます。]

有料



Soft Leather 極上の風合いとマットな仕上げが高級感を演出する合成皮革レザーです。

オリジナルレザーの特性

+ 耐アルコール機能
耐次亜塩素酸機能
薬品・化粧品類が付着しても硬化しにくい特性です。

抗菌機能
大腸菌等の繁殖を抑え、
防止する特性です。

防汚機能
トップ層にフッ素加工を
施し、汚れを落としやす
い特性です。

難燃機能
表面燃焼試験B法
[JIS1091合格品]

RoHS対応
鉛やカドミウムを使用し
ない環境にやさしい特
性です。

レザーのお手入れについて
レザー機能を十分に発揮させ、
衛生的にご使用いただくため
に、柔らかい清潔なウエス(布)
でこまめに乾拭きしてください。
また、洗剤には市販の専用
クリーナー、メディクリーナー
(P305参照) または、ぬるま
湯で薄めた中性洗剤をご使用
ください。

カラー・素材について

オリジナルレザー18色以外の
カラーやファブリック(布地)の
ご要望にもお応えいたします。
お気軽にご相談ください。

写真印刷について

製品の色調は、出来る限り実物
どおりの写真印刷に努めており
ますが、多少異なる場合もござ
います。予めご了承ください。



L-8646



L-8647



L-8648



L-8649



L-8650



L-8651



L-8652



L-8653



L-8654



L-8655



L-8656



L-8657



L-8658



L-8659



L-8660



L-8661



L-8662



L-8663



L-8664



L-8665



L-8666



L-8667



L-8668



L-8669



L-8670



L-8671



L-8672



L-8673



L-8674



L-8675



L-8676




L-8677



L-8678



L-8679

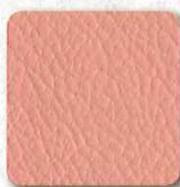

L-8680



L-8681



L-8682



L-8683




L-8684




L-8685



L-8686

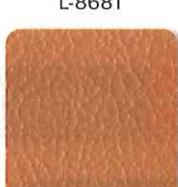

L-8687

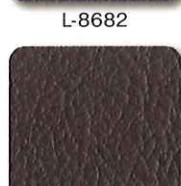

L-8688



L-8689



L-8690



L-8691



L-8692



L-8693



L-8694



L-8695



L-8696



L-8697



L-8698



L-8699



耐アルコール機能



防汚機能



難燃機能

Ro
PVC
RoHS対応

L-8700



L-8701



L-8702



L-8703



L-8704



L-8705



L-8706



L-8707



L-8708



L-8709



L-8710



L-8711



L-8712



L-8713



L-8714



L-8715



L-8716



L-8717



L-8718



L-8719



L-8720



L-8721



L-8722



L-8723



L-8724



L-8725



L-8726



L-8727



L-8728



L-8729



L-8730



L-8731



L-8732



L-8733



L-8734



L-8735



L-8736



L-8737



L-8738



L-8739



L-8740



L-8741



L-8742



L-8743



L-8744



L-8745



L-8746



L-8747



L-8748



L-8749



L-8750



L-8751



L-8752



L-8753

INFORMATION

カタログの掲載について

■特別措置法による価格表示

□本カタログは特別措置法により消費税抜き(税別)の価格を表示しております。

■製品の寸法及び重量表示

□カタログ表示の製品寸法は、幅・長さ・奥行・高さをcm単位で表示しておりますが、実際の製品とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

□カタログ表示の重量は、平均サイズに対する重量を表示しておりますが、実際の製品とは多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

■印刷の色調

□製品の色調は、出来る限り実物どおりの写真印刷に努めておりますが、多少異なる場合もございます。予めご了承ください。

■製品の改良

□仕様および外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

製品の納期について

■オプション製品 ▶ ご注文後、土日・祝日を除く2~10日後の出荷

■マクラ製品 ▶ ご注文後、土日・祝日を除く4~6日後の出荷

■ベッド製品 ▶ ご注文後、土日・祝日を除く7~10日後の出荷

□特注製品、大口注文または欠品中の製品につきましては該当いたしません。予め販売窓口までお尋ねください。

□天候・交通事情、製造の不具合等により、ご指定日のお届けが困難な場合がございます。必ずゆとりを持ってご注文ください。

□製品のお届けは、運送便につき玄関口までとなります。また、一部の大型製品につきましては、搬入時のお手伝いをお願いさせていただく場合がございます。

予めご了承ください。

表示マークについて

◀ 強度の目安(1~5段階:当社比)

強度の目安はアイコンで表示しております。一つのアイコンに対して製品強度(等分布荷重)は100kgとなり、製品の上から重り(荷重)を一定期間載せた時に生じる木部疲労や金属疲労をもとに算出しております。その際の強度基準は等分布に対する荷重であり、局部的荷重または縦横方向への荷重ではございません。予めご了承ください。

□強度レベル1~2／標準的な診察用ベッドに最適です。

□強度レベル3~5／強度を必要とする治療用ベッドに最適です。

(注)マッサージなどの治療にはレベル3以上が必要となります。詳しくは販売窓口までご相談ください。

◀ 組立必要(スパナ付属)

□簡単な組み立て作業が必要な製品となります。簡易工具を同梱しておりますが、ドライバー工具による組み立て作業が必要な製品には、簡易工具を同梱しておりません。予めご了承ください。

◀ かどまる加工

□座シート(天板)の四方にまるみを設けている加工です。空間の圧迫感を軽減させ、優しい外観に仕上がっている製品です。

NEW ◀ 本カタログに新しく掲載された製品です。

返品不可 ◀ お客様都合によるご返品をお受けできない製品です。

製品に関するご使用上の注意事項

□屋外または直射日光下でのご使用は、製品を劣化させる原因となりますのでお避けください。

□空調機(エアコン・ストーブ等)からの排気が直接あたる場所でのご使用はお避けください。製品の劣化または故障の原因となります。

□ベッド製品は必ず水平な場所に設置し、安全をご確認の上ご使用ください。また凸凹により安定しない場合は、AJスターラー等で微調整してください。昇降機能付きの製品で、前後に円弧を描きながら昇降する製品を設置される場合は、移動範囲以上を壁または人から離して設置してください。

□電動昇降ベッド等は、摩擦音を軽減するために1ヶ月に1回程度、指定された箇所に市販のグリースを注入してください。

□製品は適切な揮発処理を施し届けておりますが、原材料等のボンド臭が滞留している場合がございます。ご購入日から2~3週間程度は設置場所の換気にご注意ください。

□レザーフィニッシュ(オリジナルレザー・オプションレザー)のお手入れは、柔らかい清潔なウエス(布)でこまめに乾拭きしてください。また、洗剤には市販の専用クリーナー、メディクリーナー(P305参照)または、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をご使用ください。

□スチール材(フレーム・脚部等)のお手入れは乾拭きが基本です。水気の多い場所でのご使用は、金属疲労の原因となりますのでお避けください。

□AJスターラー、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材(ワックス等)が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所には十分ご注意くださいようお願いいたします。


うつ伏せ時の息苦しさを解消させる有孔加工

うつ伏せの姿勢でも息苦しくなりません。
フェイス用のクッションをご使用頂くことで、さらに快適性がアップし、施術効果を最大限導き出すのに役立ちます。
DXベッドをご要望いただく2人に1人が【有孔】仕様をお選びになります。



DELUXE BED

DXベッドシリーズ photo/小児用DXベッド(刺繍付き) TB-1512 [P14]

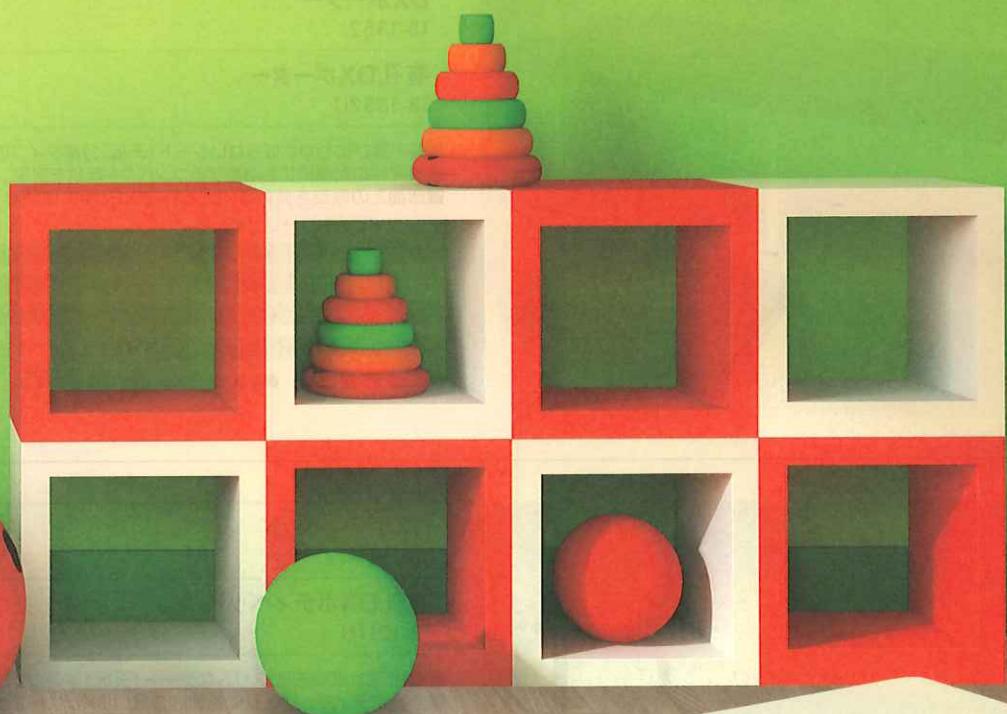



DXエコベッド

TB-1453

¥45,000(税別)

有孔DXエコベッド

TB-1453U

¥52,500(税別)

- コストパフォーマンスを極限まで追求した生産サイズ限定施術台。
- 森林資源の有効活用にもつながる環境に優しい材料OSB合板を採用。
- 5cm角脚を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ		180	
高さ	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg

※OSB合板は高温圧縮した木質ボードで強度や剛性を備え断熱性・気密性・防虫性にも優れています。



DXポーター

TB-1352

¥46,000(税別)

有孔DXポーター

TB-1352U

¥53,500(税別)

- 持ち運びにもかさばらないシート(天板)分割タイプのマッサージベッド。
- 災害等の緊急時にも活躍するコンパクト収納を実現。安心の6本脚仕様。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ		180		190	
高さ	40	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約20kg



※画像は有孔タイプです。

DXボディベッド

TB-1211

¥55,000(税別)

有孔DXボディベッド

TB-1211U

¥62,500(税別)

- 直径5cmの脚部とスリムなシート(天板)厚のシンプルなデザイン。
- 全身ボディマッサージに信頼性の高いDXシリーズの設計基準を採用。
- 落ち着きのある環境に優しいライトブラウン粉体塗装を特別標準装備。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



※画像は有孔タイプです。

DXマッサージベッド

TB-908

¥60,000(税別)

有孔DXマッサージベッド

TB-908U

¥67,500(税別)

- 治療院から病院・クリニックの診察室まで幅広く活躍している施術台。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



DXスリーパー

TB-994

¥65,000(税別)

有孔DXスリーパー

TB-994U

¥72,500(税別)

- 体圧分散性に優れた厚み2cmの低反発ウレタンフォームを全面に採用。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

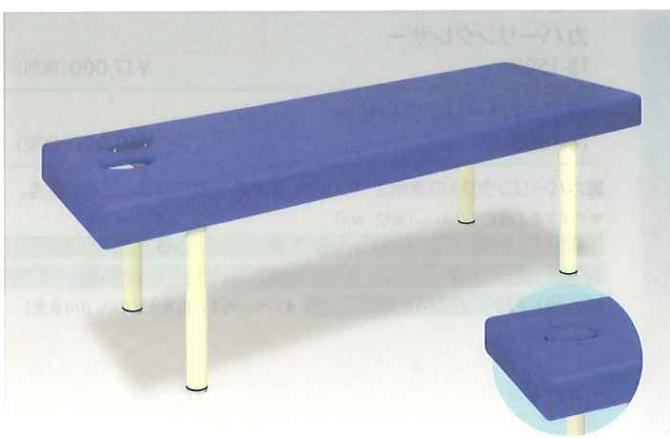

有孔フタ付DXベッド

TB-581

¥70,500(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約25kg



外脚DXベッド

TB-585

¥60,000(税別)

有孔外脚DXベッド

TB-585U

¥67,500(税別)


- 治療院から病院・クリニックの診察室まで幅広く活躍している施術台。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg

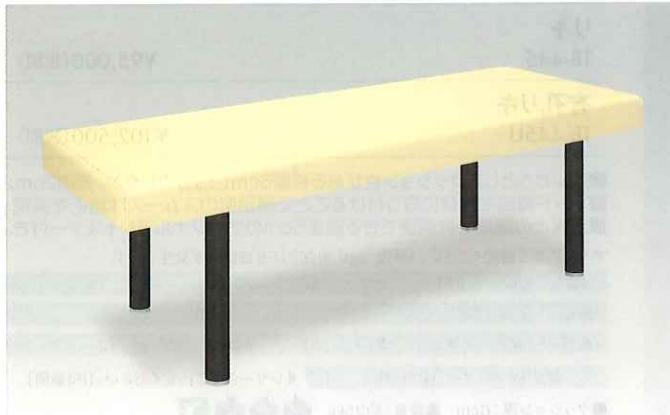

DXブラウン

TB-993

¥65,000(税別)

有孔DXブラウン

TB-993U

¥72,500(税別)

- 深みのあるレトロなチョコレート塗装を採用したアジアン風仕上げ。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg





NEW

※画像は有孔タイプです。

カバーリングDX

TB-1497

¥70,000(税別)

有孔カバーリングDX

TB-1497U

¥77,500(税別)

- シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
- お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
- 予備のカバーリングレザーで簡単に院内のイメージチェンジが可能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ			170	180	190
高さ	40	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約24kg



※ベッドとカバーリングレザーのセット



NEW

※ベッドは含まれません。※画像は有孔タイプです。

カバーリングレザー

TB-1503

¥17,000(税別)

有孔カバーリングレザー

TB-1503U

¥19,000(税別)

- カバーリングDXの専用オプション。予備の交換用レザーとして最適。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	50	55	60	65	70
長さ			170	180	190

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]



DXベッド(汚物缶付き)

TB-1249

¥72,000(税別)

有孔DXベッド(汚物缶付き)

TB-1249U

¥79,500(税別)

- 脱脂綿のアルコールやもぐさの熱にも対応するステンレス蓋付き汚物缶。
- 簡単に取り外しが可能な差込式(回転機能付き)でお手入れも衛生的。
- 治療院から病院・クリニックの診察室まで幅広く活躍している施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180	190	200		
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



●汚物缶:直径18cm 高さ18cm



リキ

TB-445

¥95,000(税別)

有孔リキ

TB-445U

¥102,500(税別)

- ふんわりとしたクッション性がある極厚6cm(上面)ウレタン。側面2cm。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180	190	200		
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約25kg





※画像は有孔タイプです。

DXクラウン

TB-1190

¥110,000(税別)

有孔DXクラウン

TB-1190U

¥117,500(税別)

- 最高級のクッション性を実現した高反発・高密度ウレタンを標準装備。
- 極上の風合いを体感できるマット仕上げのソフト合皮レザーを採用。
- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

ソフトラザー(8色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:8cm ●重量:約25kg



かどまる

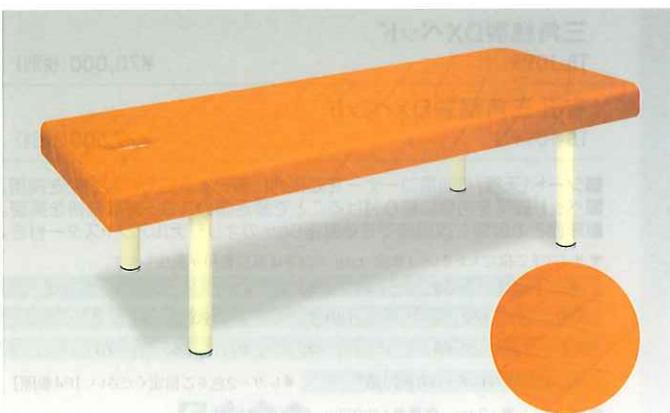

※画像は有孔タイプです。

キルトDX

TB-1123

¥80,000(税別)

有孔キルトDX

TB-1123U

¥87,500(税別)

- レザー裏面に1cmの樹脂綿を挟み込んだ風合いの良いキルト加工仕上げ。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70
長さ	170		180		190
高さ	40	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



かどまる



※画像は有孔タイプです。

DX ウィーヴ

TB-1141

¥100,000(税別)

有孔DX ウィーヴ

TB-1141U

¥107,500(税別)

- 耐久性・通気性・クッション性に優れた3次元ウィーヴ構造シート。
- 体圧分散性が高く高反発で体位変換しやすい新感覚クッション材。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5.5cm ●重量:約26kg



かどまる



DXベッド-R

TB-1068

¥70,000(税別)

有孔DXベッド-R

TB-1068U

¥77,500(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



かどまる



ラム

TB-329

¥102,500(税別)

有孔ラム

TB-329U

¥110,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約26kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



三角縫製DXベッド

TB-1099

¥70,000(税別)

有孔三角縫製DXベッド

TB-1099U

¥77,500(税別)

- シート(天板)の四隅コーナーを効果的に演出する三角縫製技術を採用。
- ベッド脚部を内側に取り付けすることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



※シートは本体カラーと三角縫製カラーをご指定ください。



モード

TB-310

¥67,500(税別)

有孔モード

TB-310U

¥75,000(税別)

- シートを2色カラーで分割することで頭足側の位置決め等に便利です。
- ベッド脚部を内側に取り付けすることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	40	45	50	55

オリジナルレザー(18色対応)

※レザー2色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



※画像は有孔タイプです。



DXトップ

TB-153

¥70,000(税別)

有孔DXトップ

TB-153U

¥77,500(税別)

- シート上面に施術中の滑りを防止するストップレザー(黒色)を加工。
- 施術による患者様の動きを最小限に軽減し施術効果を向上させます。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



※滑り止め(ストップレザー)の黒色は変更できません。ご注意ください。

**DXウッド**

TB-634

¥64,000(税別)

有孔DXウッド

TB-634U

¥71,500(税別)

- ベッド脚部に温かみのある木目調の不燃認定化粧フィルムを貼付加工。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg

**シルバーDXベッド**

TB-921

¥72,500(税別)

有孔シルバーDXベッド

TB-921U

¥80,000(税別)

- ベッド脚部に衛生的で清潔感のあるシルバークロムメッキ加工を採用。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg

**小児用DXベッド**

TB-183

¥60,000(税別)

有孔小児用DXベッド

TB-183U

¥67,500(税別)

- 子供の身長に合わせた小児用専用サイズ。院内スペースを有効に活用。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	45	50	55	60	65	70	75	80		
長さ	130							140	150	160
高さ	35	40	45	50	55	60	65	70		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約23kg

**小児用DXベッド(刺繡付き)**

TB-1512

¥62,500(税別)

有孔小児用DXベッド(刺繡付き)

TB-1512U

¥70,000(税別)

- 6種類のアニマルデザインから選べる刺繡加工付きの小児専用ベッド。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	45	50	55	60	65	70	75	80		
長さ	130							140	150	160
高さ	35	40	45	50	55	60	65	70		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約23kg



NEW



※画像は有孔タイプです。

アイホット

TB-476

¥80,000(税別)

有孔アイホット

TB-476U

¥87,500(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の強化型DXベッド。
- 温度の強弱を設定できるスライドボリューム式コントローラー付き。
- 強度レベルをアップした上段H型脚部。オリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85
長さ			180		190	
高さ	40	45	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg



※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30分～60分必要です。



H型DXベッド

TB-928

¥67,500(税別)

有孔H型DXベッド

TB-928U

¥75,000(税別)

- 強度を必要とする施術にお薦めするH型脚部を採用したDXベッド。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180		190	200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



※画像は有孔タイプです。

フレンド

TB-368

¥67,500(税別)

有孔フレンド

TB-368U

¥75,000(税別)

- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180		190	200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



外脚H型DXベッド

TB-941

¥67,500(税別)

有孔外脚H型DXベッド

TB-941U

¥75,000(税別)

- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180		190	200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg





デビッド

TB-360

¥78,000(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85				
長さ			170			180			190			200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm(本体)
- 重量:約26kg





※画像は有孔タイプです。

ソフトDX

TB-459

¥90,000(税別)

有孔ソフトDX

TB-459U

¥97,500(税別)

- ふんわりとした極上の感触を実現するスーパーソフトウレタンを採用。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約27kg



※YJTウレタンはソフトウレタンの一種で、低反発ウレタンではありません。ご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

アリス

TB-323

¥100,000(税別)

有孔アリス

TB-323U

¥107,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約30kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



※画像は有孔タイプです。

アプロ

TB-230

¥85,000(税別)

有孔アプロ

TB-230U

¥92,500(税別)


- 上質な高反発・高密度ウレタンフォームが快適さと最適な硬質を実現。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約26kg

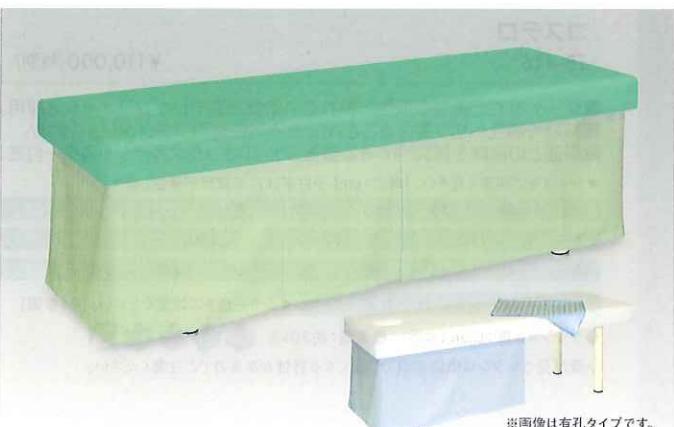

※画像は有孔タイプです。

DXセラピ

TB-677

¥70,000(税別)

有孔DXセラピ

TB-677U

¥77,500(税別)

- 脱衣カゴへ入れる患者様の私物や院内の備品等を衛生的に収納可能。
- マジックテープ式で簡単に脱着が可能。家庭用洗濯機で丸洗い可能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



カーテンカラー

クリーム T-19181 ベージュ T-19182 ピンク T-19183 グリーン T-19184 ブルー T-19185

**DXセラピ(棚付き)**

TB-701

¥90,000(税別)

有孔DXセラピ(棚付き)

TB-701U

¥97,500(税別)

- 収納力にこだわった2段の棚付き。院内の備品等を衛生的に収納可能。
- マジックテープ式で簡単に脱着が可能。家庭用洗濯機で丸洗い可能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	65							70	75	80

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約39kg



カーテンカラー クリーム T-19181 ベージュ T-19182 ピンク T-19183 グリーン T-19184 ブルー T-19185

**DXベッド-2**

TB-908-2

¥72,500(税別)

有孔DXベッド-2

TB-908U-2

¥80,000(税別)

- 脱衣力ゴ(TB-73-01・TB-73-02)を2本のパイプ棚の間に収納可能。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85	90	95		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg

**DXベッド-3**

TB-908-3

¥75,000(税別)

有孔DXベッド-3

TB-908U-3

¥82,500(税別)

- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる3本のパイプ棚付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg

**DXベッド-4**

TB-908-4

¥77,500(税別)

有孔DXベッド-4

TB-908U-4

¥85,000(税別)

- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる4本のパイプ棚付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg



**DXベッド-5**

TB-908-5

¥77,500(税別)

有孔DXベッド-5

TB-908U-5

¥85,000(税別)

- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザーラック付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180		190	200	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約28kg

**外脚DXベッド-2**

TB-122

¥80,000(税別)

有孔外脚DXベッド-2

TB-122U

¥87,500(税別)

- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備した2本パイプ棚付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約32kg

**外脚DXベッド-5**

TB-108

¥80,000(税別)

有孔外脚DXベッド-5

TB-108U

¥87,500(税別)

- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザーラック付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170			180	190		200	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約35kg

**外脚DXベッド-7**

TB-141

¥80,000(税別)

有孔外脚DXベッド-7

TB-141U

¥87,500(税別)

- レザーラックと脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)を装備した複合的な収納力。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約35kg



**外脚DXベッド-8**

TB-1034

¥77,500(税別)

有孔外脚DXベッド-8

TB-1034U

¥85,000(税別)

- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる頑丈なメッシュ棚付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg

**DXアイホット-5**

TB-686

¥90,000(税別)

有孔DXアイホット-5

TB-686U

¥97,500(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の強化型DXベッド。
- 温度の強弱を設定できるスライドボリューム式コントローラー付き。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザーペン付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75				
長さ	180			190	200			
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約29kg



※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。

**ワイド**

TB-292

¥135,000(税別)

有孔ワイド

TB-292U

¥142,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした安定感のある強化型脚部仕様の施術台。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	85	90	95	100
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約32kg

**有孔フタ付ワイド**

TB-288

¥145,500(税別)

- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- ワイドサイズを標準設定とした安定感のある強化型脚部仕様の施術台。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]


幅	85	90	95	100
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約33kg



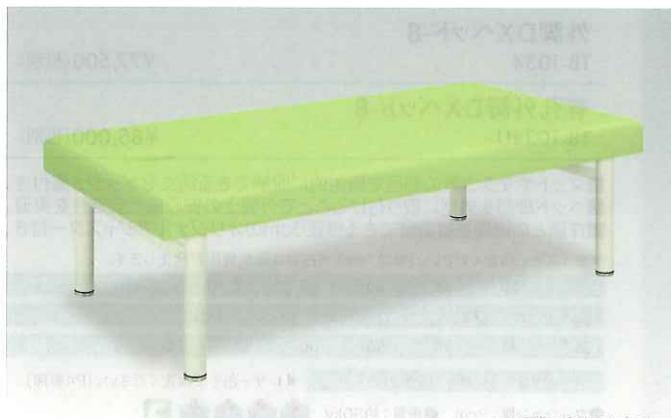

オーダス

TB-249

¥110,000(税別)

有孔オーダス

TB-249U

¥117,500(税別)

- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。
- ワイドサイズを標準設定とした安定感のある強化型脚部仕様の施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約38kg



マシュロ

TB-281

¥160,000(税別)

有孔マシュロ

TB-281U

¥167,500(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- ワイドサイズを標準設定とした安定感のある強化型脚部仕様の施術台。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約36kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。



足圧ボディケアベッド

TB-1241

¥180,000(税別)

有孔足圧ボディケアベッド

TB-1241U

¥187,500(税別)

- 足圧健康法を実現できる足圧術専用に最適な低床型マッサージベッド。
- 長時間の足圧術でも安定性を保持する硬質ウレタンフォームを採用。
- アジア風でお洒落な雰囲気を演出するブラウン粉体塗装を標準装備。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	90	100	110	120
長さ	180	190	200	
高さ	15	20	25	30


オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:4cm ●重量:約60kg



※幅110cm以上の製品はシート表面の中央に縫製ラインが入ります。

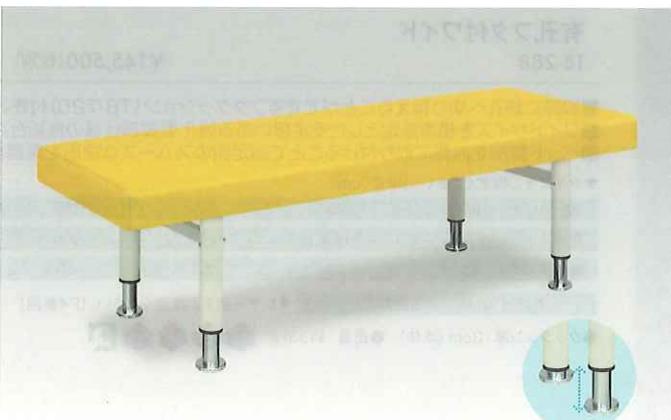

ハイローDXベッド

TB-951

¥100,000(税別)

有孔ハイローDXベッド

TB-951U

¥107,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 患者様への施術内容に応じた適切な高さを容易に設定可能な施術台。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80	75/85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg



※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



外脚ハイローDXベッド

TB-953

¥100,000(税別)

有孔外脚ハイローDXベッド

TB-953U

¥107,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 患者様への施術内容に応じた適切な高さを容易に設定可能な施術台。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80	75/85		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm ●重量:約30kg

※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。

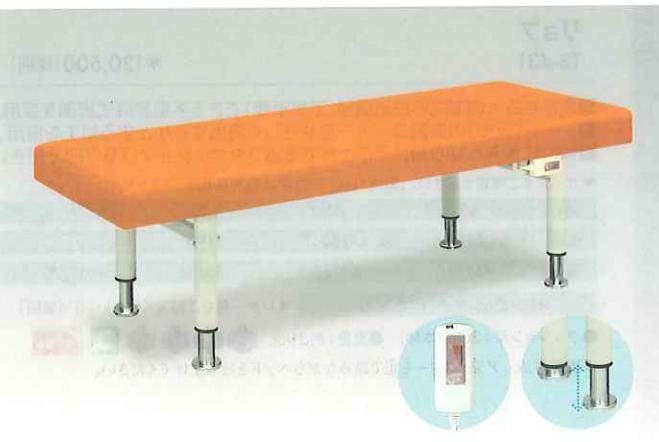

ハイローDXアイホット

TB-687

¥112,500(税別)

有孔ハイローDXアイホット

TB-687U

¥120,000(税別)

- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の手動昇降式施術台。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75				
長さ	180			190	200			
高さ	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80	75/85

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm ●重量:約31kg

※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。



ロハス

TB-273

¥110,000(税別)

有孔ロハス

TB-273U

¥117,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75		
長さ	170			180	190	200
高さ	45/55	50/60			55/65	60/70

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm ●重量:約30kg

※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



クリオ

TB-172

¥110,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッション(TB-720)付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40/50	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80	75/85		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:3cm (本体) ●重量:約31kg

※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



リセナ

TB-227

¥130,000(税別)

有孔リセナ

TB-227U


¥137,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- ▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45/55		50/60		55/65		60/70	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約32kg

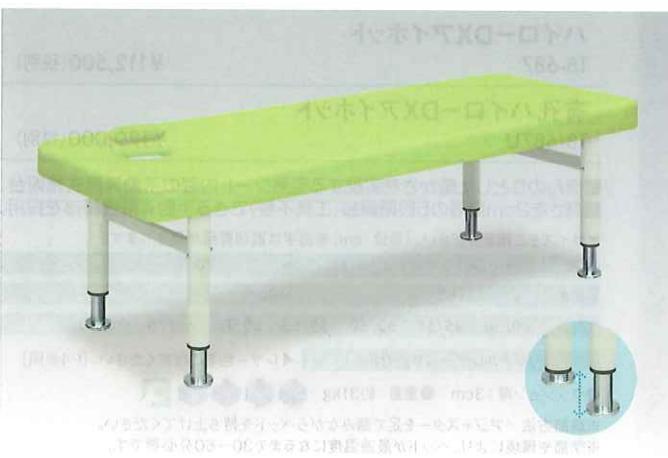※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。
※調節方法／AJスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。

リョフ

TB-431

¥120,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 瞬時に無孔へ切り替えることができるフタクッシュン(TB-720)付き。
- ▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	45/55	50/60	55/65	60/70

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約31kg

※調節方法／AJスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



リュース

TB-213

¥130,000(税別)

有孔リュース

TB-213U

¥137,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザー棚付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- ▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45/55		50/60		55/65		60/70	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約38kg

※調節方法／AJスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



ウルフ

TB-397

¥130,000(税別)

有孔ウルフ

TB-397U

¥137,500(税別)

- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザー棚付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- ▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45/55		50/60		55/65		60/70	

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約38kg

※調節方法／AJスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



ハイローワイドDX

TB-607

¥130,000(税別)

有孔ハイローワイドDX

TB-607U

¥137,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした安定感のある強化型脚部仕様の施術台。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	40/50	45/55	50/60	55/65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約40kg



※調節方法／AJAスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



ソックスベッド

TB-755

¥70,000(税別)

有孔ソックスベッド

TB-755U

¥77,500(税別)

- シート(天板)と脚部に同色のレザーを加工した一体感のある施術台。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルAJAスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



H型ソックスベッド

TB-756

¥80,000(税別)

有孔H型ソックスベッド

TB-756U

¥87,500(税別)

- シート(天板)と脚部に同色のレザーを加工した一体感のある施術台。
- 強度を必要とする施術にお薦めするH型脚部を採用した施術ベッド。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルAJAスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約26kg



キャスター付DXベッド

TB-926

¥100,000(税別)

有孔キャスター付DXベッド

TB-926U

¥107,500(税別)

- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg



**キャスター**

TB-178

¥100,000(税別)

有孔キャスター

TB-178U

¥107,500(税別)

- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg

**キャスター100**

TB-405

¥110,000(税別)

有孔キャスター100

TB-405U

¥117,500(税別)

- 移動時の安定性を重視した直径10cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg

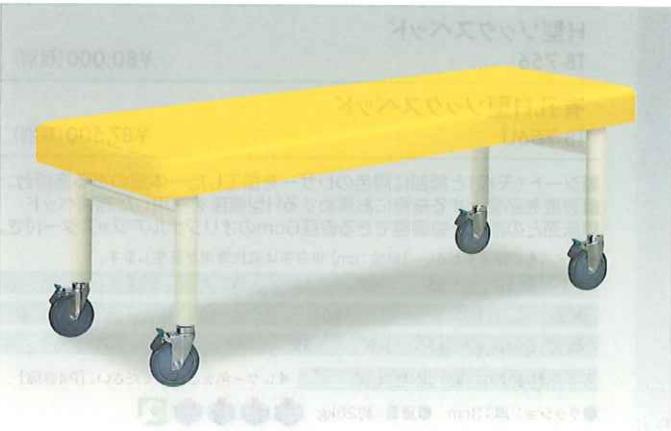**キャスター150**

TB-1416

¥110,000(税別)

有孔キャスター150

TB-1416U

¥117,500(税別)

- 移動時の安定性を重視した直径15cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg

**ドワーフ**

TB-437

¥115,000(税別)

有孔ドワーフ

TB-437U

¥122,500(税別)

- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
- 患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣カゴを標準装備。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85	90
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約35kg





キャスロン

TB-205

¥140,000(税別)

有孔キャスロン

TB-205U

¥147,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定の直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	40	45	50	55

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約36kg



メディス

TB-262

¥130,000(税別)

有孔メディス

TB-262U

¥137,500(税別)

- 長さ方向にスライドができるF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。
- ワンタッチのダブル方式で車輪停止と旋回停止を行える安全機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約35kg



F型キャスター

TB-371

¥120,000(税別)

有孔F型キャスター

TB-371U

¥127,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さまに向けて差し込むことで収納可能。
- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約35kg



M型DXベッド

TB-929

¥85,000(税別)

有孔M型DXベッド

TB-929U

¥92,500(税別)

- タオル等を掛けられる衛生的なクロムメッキのハンガーパイプ付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg





※画像は有孔タイプです。

ミント

TB-457

¥80,000(税別)

有孔ミント

TB-457U

¥87,500(税別)

- 最大1200Wまでの機器類が使用できる2口コンセント(安全扉式)付き。
- 治療に使用する医療機器等の電源コードがスムーズに脱着可能です。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



コンセント付DXベッド

TB-927

¥72,500(税別)

有孔コンセント付DXベッド

TB-927U

¥80,000(税別)

- 合計1200Wまでの電気機器が使用できる3口用コンセントボックス付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けすることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



アクチベッド

TB-812

¥90,000(税別)

- 特殊なテクニックの為の施術台。脱着式の足置きクッション1個付き。
- 足側からの施術を主体として開発した幅調整可能なセパレートシート。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70
長さ		180	190
高さ	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:8cm(本体) ●重量:約35kg



クロス

TB-334

¥95,000(税別)

- うつ伏せでの呼吸を楽にする穴あき有孔。サイズ:幅9cm×長さ70cm。
- 専門的なうつ伏せでの施術にお薦めする長穴有孔&強化型脚部仕様。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm ●重量:約30kg





前開き有孔H型DXベッド

TB-372

¥90,000(税別)

- 専門的なうつ伏せでの施術にお薦めする前開き有孔&強化型脚部仕様。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約32kg



¥90,000(税別)



整体DX

TB-105

¥90,000(税別)

- うつ伏せでの呼吸を楽にするU字型有孔。サイズ:幅15cm×長さ25cm。
- 専門的なうつ伏せでの施術にお薦めする質な極厚6cmウレタン仕様。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm ●重量:約28kg



かどまる



N型DXベッド

TB-1127

¥90,000(税別)

有孔N型DXベッド

TB-1127U

¥97,500(税別)

- ベッドからの転落を防止する安心感のあるN型ベッドガード1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで装着可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	50	55	60	65	65	70		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg



R型DXベッド

TB-923

¥84,000(税別)

有孔R型DXベッド

TB-923U

¥91,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するR型ベッドガード(TB-28)1本付き。
- ベッドガードの装着が容易な差込式。別売の点滴棒(TB-29)を装着可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ		170		180		190		200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg



**R型オーダス**

TB-250

¥130,000(税別)

有孔R型オーダス

TB-250U

¥137,500(税別)

- ワイドサイズが標準設定のR型ベッドガード(TB-28)1本付き施術台。
- ベッドガードの装着が容易な差込式。別売の点滴棒(TB-29)を装着可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約42kg

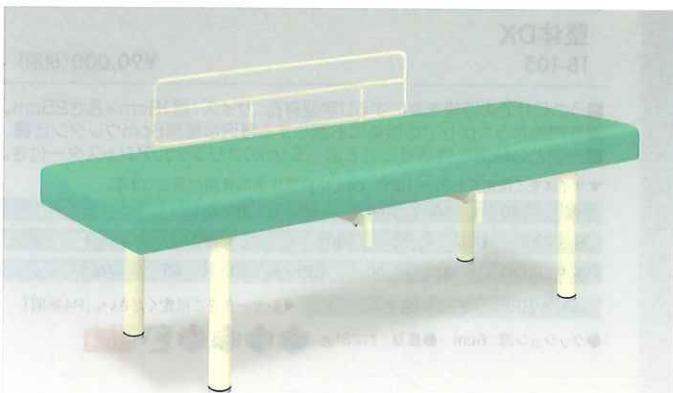**E型DXベッド**

TB-1138

¥88,500(税別)

有孔E型DXベッド

TB-1138U

¥96,000(税別)

- ベッドからの転落を防止する安全性の高いE型ベッドガード1本付き。
- ベッドガードの装着が容易な差込式。別売の点滴棒(TB-29)を収納可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg

**F型DXベッド**

TB-924

¥88,000(税別)

有孔F型DXベッド

TB-924U

¥95,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで収納可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg

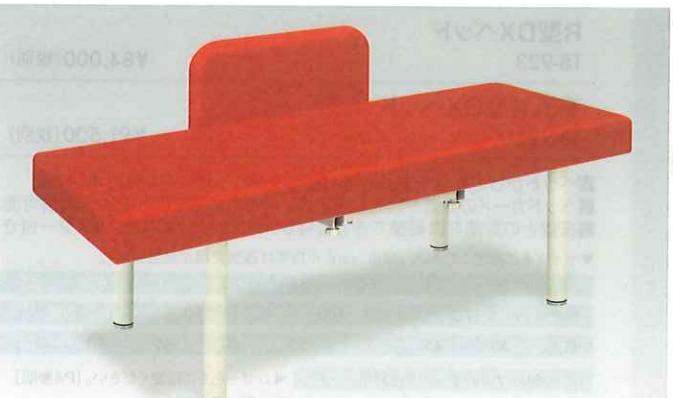**FG型DXベッド**

TB-1088

¥93,000(税別)

有孔FG型DXベッド

TB-1088U

¥100,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するレザーカバー付きF型ベッドガード。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで収納可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	50	55	60	65	70			

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約25kg



**F型オーダス**

TB-339

¥130,000(税別)

有孔F型オーダス

TB-339U

¥137,500(税別)

- ワイドサイズが標準のF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き施術台。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約42kg

**スイング型DXベッド**

TB-568

¥98,000(税別)

有孔スイング型DXベッド

TB-568U

¥105,500(税別)

- 回転機能付きストッパー式スイングガード(クロムメッキ)2本付き。
- ベッドガードの取り外しを頻繁に行う施術にお薦めするスイング式。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約31kg

**粉体F型DXベッド**

TB-145

¥88,000(税別)

有孔粉体F型DXベッド

TB-145U

¥95,500(税別)

- ベッドからの転落を防止する粉体F型ベッドガード(TB-27-02)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さまに向けて差し込むことで収納可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg

**ファミリー**

TB-324

¥128,000(税別)

有孔ファミリー

TB-324U

¥135,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さまに向けて差し込むことで収納可能。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	50/60	55/65	60/70	65/75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約32kg



※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



ナース

TB-335

¥108,000(税別)

有孔ナース

TB-335U

¥115,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで収納可能。
- 高さ調節(100~160cm)できるクロムメッキの点滴棒(TB-29)1本付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約35kg



S型DXベッド

TB-925

¥98,000(税別)

有孔S型DXベッド

TB-925U

¥105,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するS型ベッドガード(TB-30)1本付き。
- ストッパー式で上下に移動する便利なスライド機能。取り外し可能。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg



S型小児用DX

TB-340

¥100,000(税別)

有孔S型小児用DX

TB-340U

¥107,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するS型ベッドガード(TB-30)1本付き。
- ストッパー式で上下に移動する便利なスライド機能。取り外し可能。
- 子供の身長に合わせた小児用専用サイズ。院内スペースを有効に活用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	140	150	160	170
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg



4面F型DXベッド

TB-597

¥115,000(税別)

有孔4面F型DXベッド

TB-597U

¥122,500(税別)

- ベッドガードを四方から装着できる多目的に安全性を考慮した施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85
長さ	170	180	190	200		
高さ	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg





ハウスベッド

TB-1225

¥115,000(税別)

有孔ハウスベッド

TB-1225U

¥122,500(税別)

- ベッドガードを片側3カ所に装着できる機能を両側に備えた施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg



ガードキャスター

TB-173

¥150,000(税別)

有孔ガードキャスター

TB-173U

¥157,500(税別)

- ベッドガードを四方から装着できる多目的に安全性を考慮した施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)4本付き。
- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	65	70	75	80
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約48kg



クリニック

TB-236

¥102,500(税別)

有孔クリニック

TB-236U

¥110,000(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッドガードが不要な時には逆さに向けて差し込むことで収納可能。
- レザーケーと脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)を装備した複合的な収納力。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約38kg



609型診察ベッド

TB-609

¥130,000(税別)

有孔609型診察ベッド

TB-609U

¥137,500(税別)

- ベッドガードを四方から装着できる多目的に安全性を考慮した施術台。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)1個を標準装備した2本のパイプ棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	65	70	75	80
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約45kg





レザーガード型DXベッド

TB-931

¥100,000(税別)

有孔レザーガード型DXベッド

TB-931U

¥107,500(税別)

- 激しい施術でも安心感を与える転落防止ワイドレザーガード1本付き。
- レザーガードが不要な時には逆に向けて差し込むことで収納可能。
- レザーガードサイズ:長さ160cm×高さ15cm。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85				
長さ			170			180			190			200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80				

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体)

●重量:約34kg



G型オーダス

TB-305

¥160,000(税別)

有孔G型オーダス

TB-305U

¥167,500(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした転落防止レザーガード1本付き施術台。
- レザーガードが不要な時には逆に向けて差し込むことで収納可能。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	75	80	85	90
長さ	170	180	190	200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体)

●重量:約46kg



エレガード

TB-451

¥125,000(税別)

有孔エレガード

TB-451U

¥132,500(税別)

- 激しい施術でも安心感を与える転落防止ワイドレザーガード1本付き。
- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170			180			190			200
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体)

●重量:約41kg



LFGキャスター

TB-1021

¥160,000(税別)

有孔LFGキャスター

TB-1021U

¥167,500(税別)

- ベッドからの転落を防止するF型ベッドガード(TB-27-01)2本付き。
- 激しい施術でも安心感を与える転落防止ワイドレザーガード2本付き。
- ベッドの移動に便利な直径7.5cmのダブルロック式キャスター仕様。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	65	70	75	80
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm

●重量:約52kg



**移動式F型DXベッド**

TB-266

¥110,000(税別)

有孔移動式F型DXベッド

TB-266U

¥117,500(税別)


- 長さ方向にスライドができるF型ベッドガード(TB-27-01)1本付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約30kg

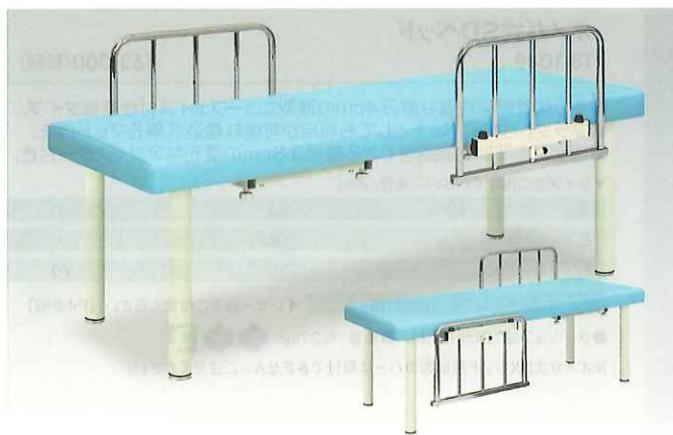**リンクス**

TB-411

¥130,000(税別)

有孔リンクス

TB-411U

¥137,500(税別)

- ベッドガードを片側3カ所に装着できる機能を両側に備えた施術台。
- ベッドからの転落を防止するS型ベッドガード(TB-30)2本付き。
- ストッパー式で上下に移動する便利なスライド機能。取り外し可能。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約40kg



※画像は有孔タイプです。

フォルダ

TB-418

¥90,000(税別)

有孔フォルダ

TB-418U

¥97,500(税別)

- 小物が収納できるスチール棚付き。サイズ:幅29×奥行28×高さ13cm。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約28kg

**天板付DXベッド**

TB-930

¥88,000(税別)

有孔天板付DXベッド

TB-930U

¥95,500(税別)

- 小物類が収納できる白色化粧合板製の棚付き。落下防止用の棚付き。
- 強度を必要とする施術にお薦めするH型脚部を採用したDXベッド。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスマーズな施術を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75	80	85	90	95		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応) ▲レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg





スライド上肢台付DXベッド

TB-588

¥110,000(税別)

有孔スライド上肢台付DXベッド

TB-588U

¥117,500(税別)

- 長さ方向にスライドできる画期的な上肢台1個付き。両側取付可能。
- ベッド脚部を外側に取り付けすることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180		190	200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約33kg



オメガ式SDベッド

TB-1049

¥63,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な厚み4cmの薄型ニューフェイス付き廉価タイプ。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径3.8cmの便利なアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180		
高さ	40	45	50

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約27kg



※オメガ式DXベッド用綿製カバーは取付できません。ご注意ください。



オメガ式MRベッド

TB-1050

¥73,000(税別)

- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。
- うつ伏せ時に快適な厚み4cmの薄型ニューフェイス付き廉価タイプ。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm]

幅	60	65	70
長さ	180		
高さ	40	45	50

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約27kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※オメガ式DXベッド用綿製カバーは取付できません。ご注意ください。



オメガ式DXベッド

TB-934

¥90,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- ベッド脚部を内側に取り付けすることで頭足側のスムーズな施術を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ			170	180		190	200	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約29kg



※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



オメガ式H型DXベッド

TB-935

¥90,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- 強度を必要とする施術にお薦めするH型脚部を採用したDXベッド。


▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180	190		200		
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm(本体)
- 重量:約30kg

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)

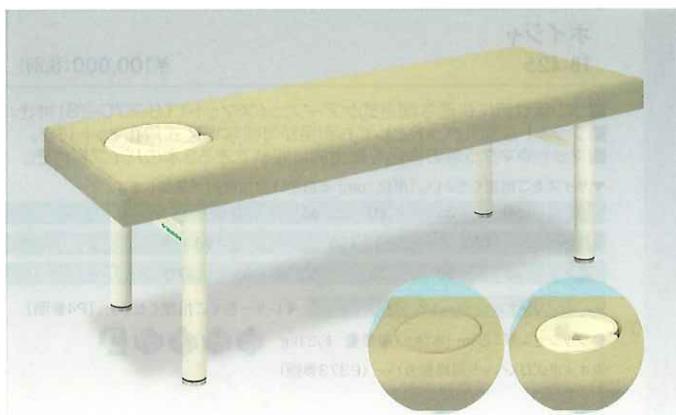

オメガ式FRベッド

TB-1041

¥100,000(税別)

- メンテナンスが容易で衛生的なレザー式ケアーフェイスマットを採用。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式マット付き。
- 保温性の高いポリエステル100%のファブリック生地を贅沢に採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180	190		200		
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

ケアーフェイスマット/オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm(本体)
- 重量:約30kg

ベッド本体・埋込式マット/ファブリックカラー(8色対応)

T-5065	T-5066	T-5067	T-5068	T-5069	T-5070	T-5071	T-5072
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



オメガ式アイホット

TB-688

¥102,500(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- ほんのりとした暖かさを実現する温熱シート内蔵の強化型DXベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。


幅	60	65	70	75
長さ				200
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm(本体)
- 重量:約30kg

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)

※季節や環境により、ベッドが最適温度になるまで30~60分必要です。

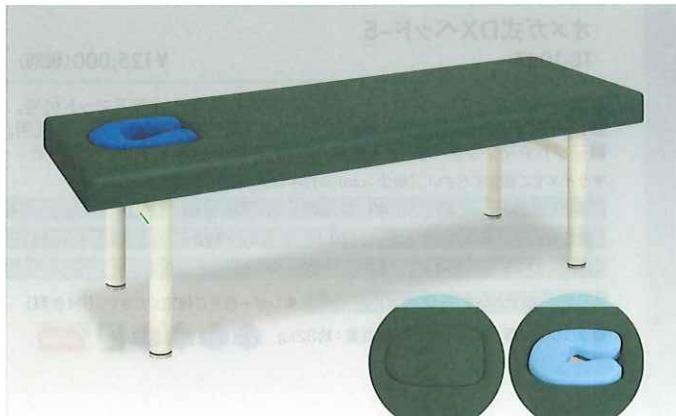

オメガ式GFベッド

TB-1176

¥97,000(税別)

- うつ伏せ時の快適さを追求したジェルフェイス(TB-77-63)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- ジェル素材に最適なジェルフェイス用ニットカバー(TB-55)1枚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180	190		200		
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm(本体)
- 重量:約30kg

※ジェルフェイスのカラーはブルー・グリーンからお選びいただけます。



DFオメガ

TB-1328

¥100,000(税別)

- うつ伏せ時の快適さを追求したディップフェイス(TB-1323)付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工採用。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

ベッド本体・埋込式マット / オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

ディップフェイス / アイボリー(艶消し)限定

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約30kg



かどまる



ポイジャ

TB-425

¥100,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる3本のパイプ棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約31kg



※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



低反発オメガDX

TB-161

¥150,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアーフェイスマット(低反発仕様)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- 体圧分散性と衝撃吸収性に優れている低反発ウレタンフォームを採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:6cm(本体) ●重量:約29kg



※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性があるのでご注意ください。

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)



オメガ式DXベッド-5

TB-1067

¥125,000(税別)

- 埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- マットやマクラ等の備品を衛生的に収納できる便利なレザー棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約32kg



かどまる



オメガ式DXベッド-6

TB-106

¥140,000(税別)

- 埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 最強レベルの強度を実現する6本脚仕様。収納に便利なレザー棚付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	170							180	190	200
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80		

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (本体)
- 重量:約45kg



かどまる



オメガセブン

TB-233

¥125,000(税別)

- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。
- レザーケースと脱衣カゴ(TB-73-01/ブルー)を装備した複合的な収納力。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	60	65	70	75
長さ	170	180	190	200
高さ	50	55	60	65

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (本体)
- 重量:約35kg



※本体の長さが180cmの場合、レザーケースの長さは100cmです。

※オメガ式DXベッド用綿製カバー (P373参照)



オメガ式ハイローDXベッド

TB-955

¥130,000(税別)

- 埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 患者様への施術内容に応じた適切な高さを容易に設定可能な施術台。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85			
長さ	170							180	190	200	
高さ	45/55	50/60							55/65	60/70	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (本体)
- 重量:約35kg



※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。

※オメガ式DXベッド用綿製カバー (P373参照)



ラッコ

TB-357

¥175,000(税別)

- ワイドサイズが標準設定の手動昇降式脚部 & オメガ機能付き施術台。
- 埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	75	80	85	90
長さ	180	190	200	210
高さ	45/55	50/60	55/65	60/70

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

- クッション厚:5cm (本体)
- 重量:約44kg



※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



オメガポート

TB-241

¥140,000(税別)

- ワイドサイズを標準設定とした安定感のあるオメガ機能付き施術台。
- うつ伏せ時に快適な埋込式ケアフェイスマット(TB-77C-28)付き。
- フラットな無孔ベッドとしても利用が可能な埋込式無孔マット付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	75	80	85	90
長さ	180	190	200	210
高さ	45	50	55	60

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約38kg



外脚H型クレードル

TB-1037

¥83,000(税別)

有孔外脚H型クレードル

TB-1037U

¥90,500(税別)

- 最適な施術ポジションを提供する無段階角度調節機能付きフェイス。
- 強度レベルをアップした上段H型脚部。ベッド下部のスペースを確保。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定感を実現。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	170		180		190		200	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

※上記の長さに差込式フェイスマットの長さ(約30cm)は含まれておません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約27kg



598型オメガマルチ

TB-598

¥140,000(税別)

- フェイス型ヘッドガスシリンダー式角度調節機能(15~90°)付き。
- 脱着式ケアフェイスマット&埋込式無孔マット付き。レザーランド付き。
- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160~190		170~200		180~210		190~220	
高さ	50	55	60	65	70	75	80	85

※上記の長さにヘッドレストの長さ(約33cm)は含まれておません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約35kg



635型GSベッド

TB-635

¥110,000(税別)

- フェイス型ヘッドガスシリンダー式角度調節機能(15~90°)付き。
- うつ伏せ時に快適な時間に変える脱着式スロープフェイス1個付き。
- 強度を必要とする施術にお薦めするH型脚部を採用した施術ベッド。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	160		170		180		190	
高さ	45	50	55	60	65	70	75	80

※上記の長さにヘッドレストの長さ(33cm)は含まれておません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザーカラーをご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約35kg





※画像は有孔タイプです。

タテスタ

TB-351

¥115,000(税別)

有孔タテスタ

TB-351U

¥122,500(税別)

- 差込式の縦型ヘッド1個付き。ロールベーパー(TB-41-01)1本付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	160							170	180	190
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

※上記の長さに差込式縦型ヘッドの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約35kg



※画像は有孔タイプです。

フェスタ

TB-176

¥95,000(税別)

有孔フェスタ

TB-176U

¥102,500(税別)

- うつ伏せ時を快適な時間に変える差込式のフェイス型ヘッド1個付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	160							170	180	190
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

※上記の長さに差込式フェスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約27kg



※画像は有孔タイプです。※アームマット(TB-389)は別売です。

アラジン

TB-393

¥105,000(税別)

有孔アラジン

TB-393U

¥112,500(税別)

- うつ伏せ時を快適な時間に変える差込式のフェイス型ヘッド1個付き。
- シート(天板)の四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	160							170	180	190
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75		

※上記の長さに差込式フェスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約27kg



※画像は有孔タイプです。

オーム

TB-177

¥130,000(税別)

有孔オーム

TB-177U

¥137,500(税別)

- うつ伏せ時を快適な時間に変える差込式のフェイス型ヘッド1個付き。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85		
長さ	160							170	180	190
高さ	45/55	50/60	55/65	60/70	65/75	70/80	75/85	80/90		

※上記の長さに差込式フェスマットの長さ(約30cm)は含まれておりません。

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約30kg



※調節方法/アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。



138型DXベッド

TB-138

¥82,500(税別)

有孔138型DXベッド

TB-138U

¥90,000(税別)

- 高低差5cmのスロープ式シート。頭部や脚部の姿勢を安定させる傾斜。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85				
長さ			170			180			190			200
高さ			50/55			55/60			60/65			65/70

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5/10cm ●重量:約27kg



DXベッド・CP型力ゴ付

TB-932

¥75,000(税別)

有孔DXベッド・CP型力ゴ付

TB-932U

¥82,500(税別)

- 患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣力ゴを標準装備。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85	90				
長さ			170			180			190			200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約27kg



レンチDXベッド

TB-1303

¥85,000(税別)

有孔レンチDXベッド

TB-1303U

¥92,500(税別)

- 患者様の私物や小物類の収納に便利な引出式の脱衣力ゴ2個を標準。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	55	60	65	70	75	80	85	90				
長さ			170			180			190			200
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm ●重量:約29kg



H型DXマルチベッド

TB-587

¥85,000(税別)

有孔H型DXマルチベッド

TB-587U

¥92,500(税別)

- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85				
長さ			160~190			170~200			180~210			190~220
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75				

オリジナルレザー(18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm (本体) ●重量:約27kg





ツインマルチ

TB-507

¥110,000(税別)

有孔ツインマルチ

TB-507U

¥117,500(税別)

- 患者様の身長に応じて30cmの伸縮が可能なフットレスト機能付き。
- ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70	75	80	85
長さ	150~210		160~220		170~230		180~240	
高さ	40	45	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約34kg



※画像は有孔タイプです。

バード

TB-341

¥100,000(税別)

有孔バード

TB-341U

¥107,500(税別)

- うつ伏せ時に便利な高さ7段階手動調節機能付き手置き台を標準装備。
- ベッド脚部を内側に取り付けることで頭足側のスムーズな施術を実現。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	45	50	55	60	65	70
長さ	170		180		190	
高さ	50	55	60	65	70	75

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約30kg



※手置き台は取り外しできます。



ビブル

TB-342

¥130,000(税別)

- うつ伏せ時に便利な高さ7段階手動調節機能付き手置き台を標準装備。
- 埋込式ケアーフェイスマット(TB-77C-28) & 埋込式無孔マット付き。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	50	55	60	65	70
長さ	170		180		190
高さ	50	55	60	65	70

オリジナルレザー(18色対応)


◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:5cm(本体) ●重量:約32kg



※手置き台は取り外しできます。

※オメガ式DXベッド用綿製カバー(P373参照)

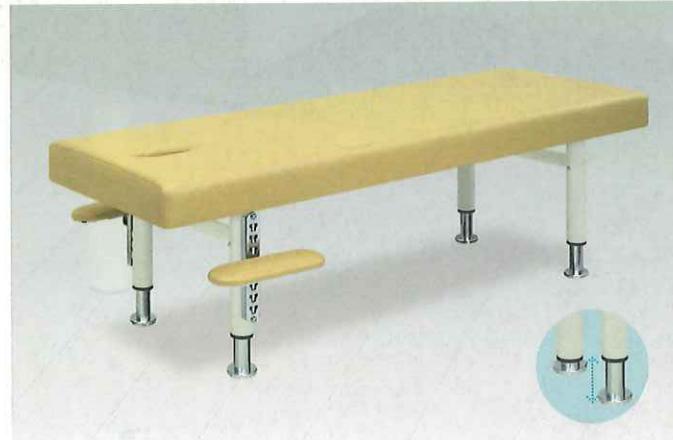

アクセス

TB-354

¥140,000(税別)

有孔アクセス

TB-354U

¥147,500(税別)

- うつ伏せ時に便利な高さ7段階手動調節機能付き手置き台を標準装備。
- 高さを2cm間隔の5段階調節(工具不要)できる手動昇降式脚部を採用。
- 床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。

▼サイズをご指定ください。[単位:cm] ※白字は追加費用が発生します。

幅	45	50	55	60	65	70
長さ	170		180		190	
高さ	50/60		55/65		60/70	

オリジナルレザー(18色対応)

◀レザー色をご指定ください。[P4参照]

●クッション厚:3cm(本体) ●重量:約34kg



※調節方法／アジャスターを足で踏みながらベッドを持ち上げてください。